


# Corning® と Falcon® マイクロプレート セレクションガイド

アッセイと創薬研究用

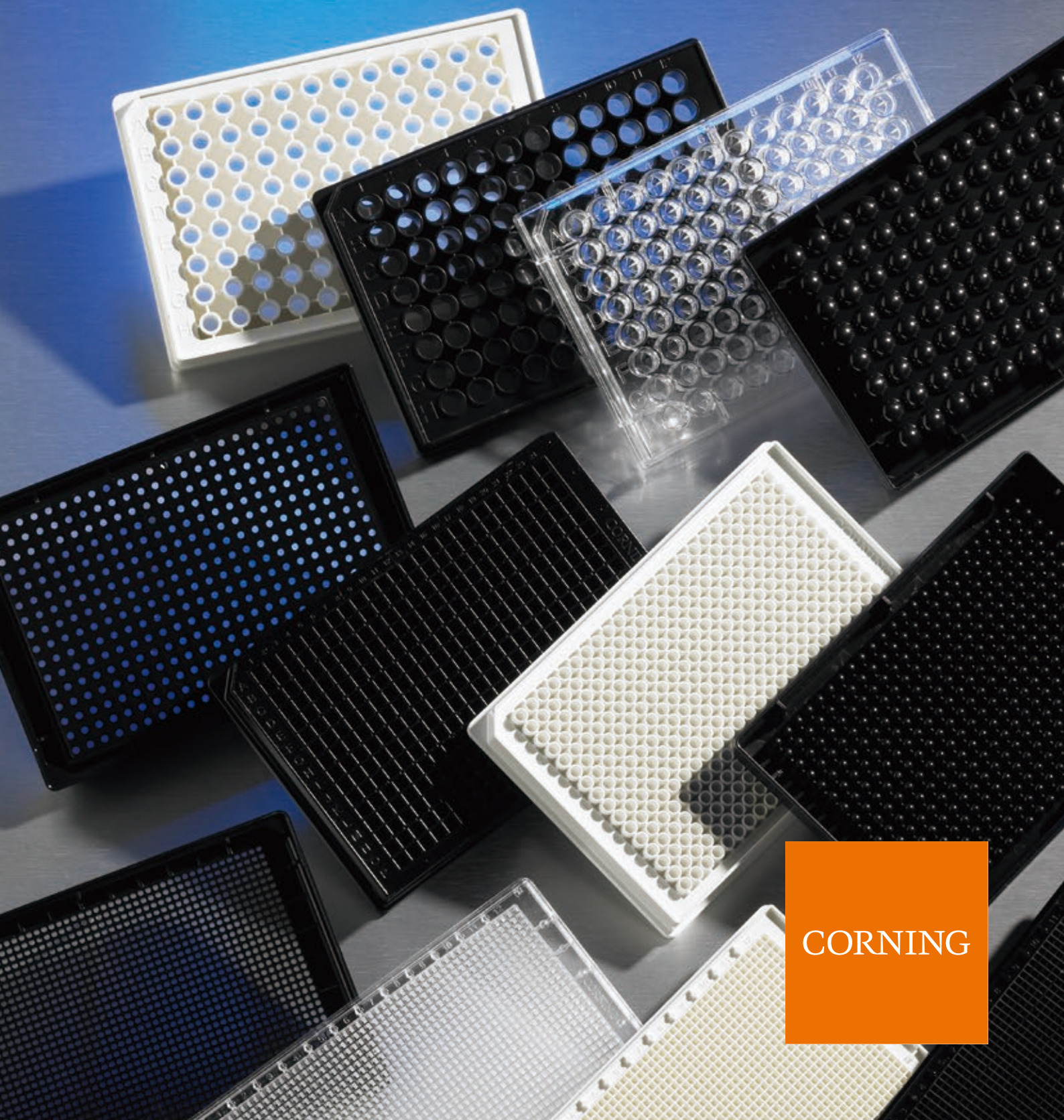

CORNING

## はじめに

Corning® とFalcon® マイクロプレートセレクションガイドでは、アッセイやハイスループットスクリーニングで使用する最新の製品とご要望の多い製品を包括的に紹介しています。


Corning Life Sciences の最新の総合的情報は、  
コーニングのウェブサイト[www.corning.com/jp/lifesciences](http://www.corning.com/jp/lifesciences) でご覧いただけます。

ご不明な点については、カスタマーサポートセンター(03-3586-1996)または技術サポート  
(ScientificSupportJP@corning.com、03-3586-1268)までお気軽にお問い合わせください。

## 注文情報

コーニングの製品は、コーニング指定の販売代理店で入手可能です。ご注文はお近くの販売代理店までお願いいたします。お求めの製品ごとに、コーニングのカタログ番号、商品の種類、希望数量をお伝えください。

2023年4月 コーニングインターナショナル株式会社 ライフサイエンス事業部

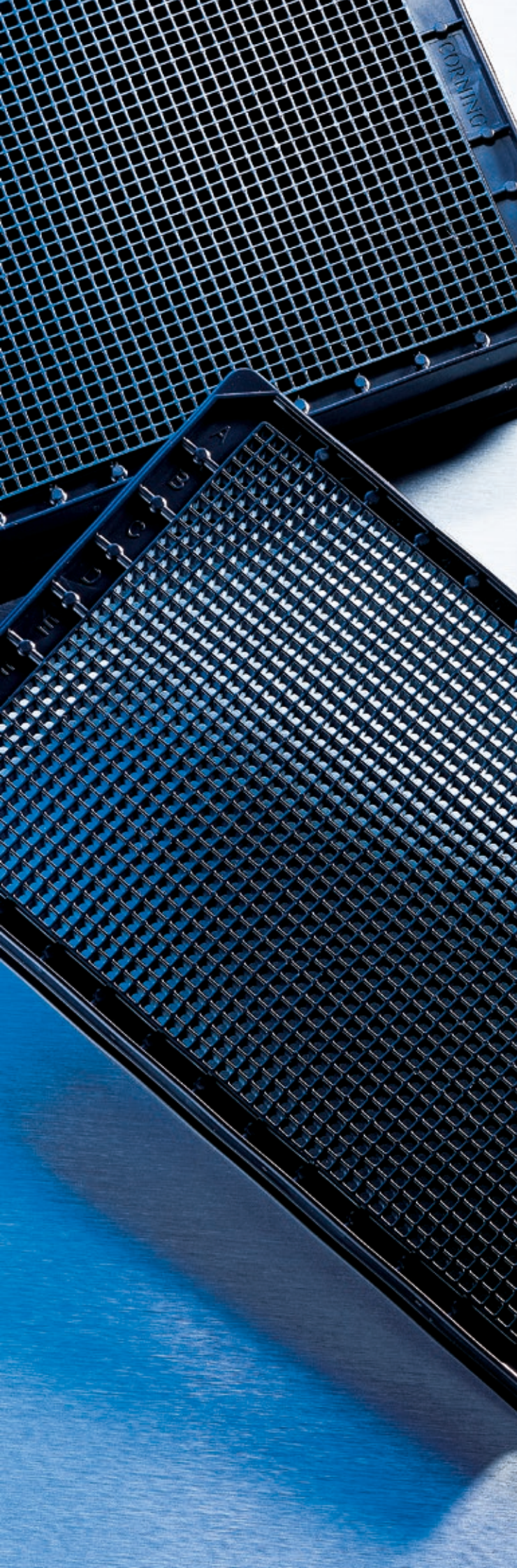

## マイクロプレート

概要 .....	2
マイクロプレートの選択手順 .....	3
マイクロプレートの選択 .....	4
マイクロプレートセレクションガイド .....	21
Corning®とFalcon®96ウェル マイクロプレート .....	21
CorningとFalcon384ウェル マイクロプレート .....	31
Corning 1536ウェル マイクロプレート .....	37
マイクロプレート用アクセサリ .....	42
参考資料 .....	44
コーニングのアッセイ用表面の性質とアプリケーション ..	44
厳選されたコーニングの技術情報 .....	45
索引・価格表 .....	46

## 概要

### 高い品質水準

コーニングはライフサイエンス用実験器具を提供するにあたり、85年以上にわたって常に高い基準を設定してまいりました。コーニングは細胞培養用、セルベースおよび生化学的アッセイ用、ジェノミクス用製品などのプラスチック製品を幅広く提供しており、世界中での使用実績を有します。コーニングは製品デザインとプラスチック成型の最高基準を満たす努力をしています。

Corning® マイクロプレートおよびアクセサリは、厳密な工程管理の下で製造されており、均一な性能を保証しております。

お客様のご要望に応じて Corning マイクロプレートの品質保証書 (Certificate of Compliance) を発行いたします。また、製品の規格および試験方法を記載した製品規格書および製品図面も提供しています。最寄りの弊社代理店またはコーニングまでご連絡ください。


### マイクロプレートの機器との互換性

オートメーション化された実験装置の使用が増加していることから、それらの機器への適合性と機能が保証された製品のニーズが高まっています。Corning マイクロプレートは、オートメーションに対応できるようにデザインされており、業界規格に適合しています。また、コーニングは幅広い機器互換性プログラムを設定しており、主要な研究機器メーカーは Corning マイクロプレートが自社の装置に適合することを確認しております。


# マイクロプレートの選択手順

## 概要

## 創薬プロセス

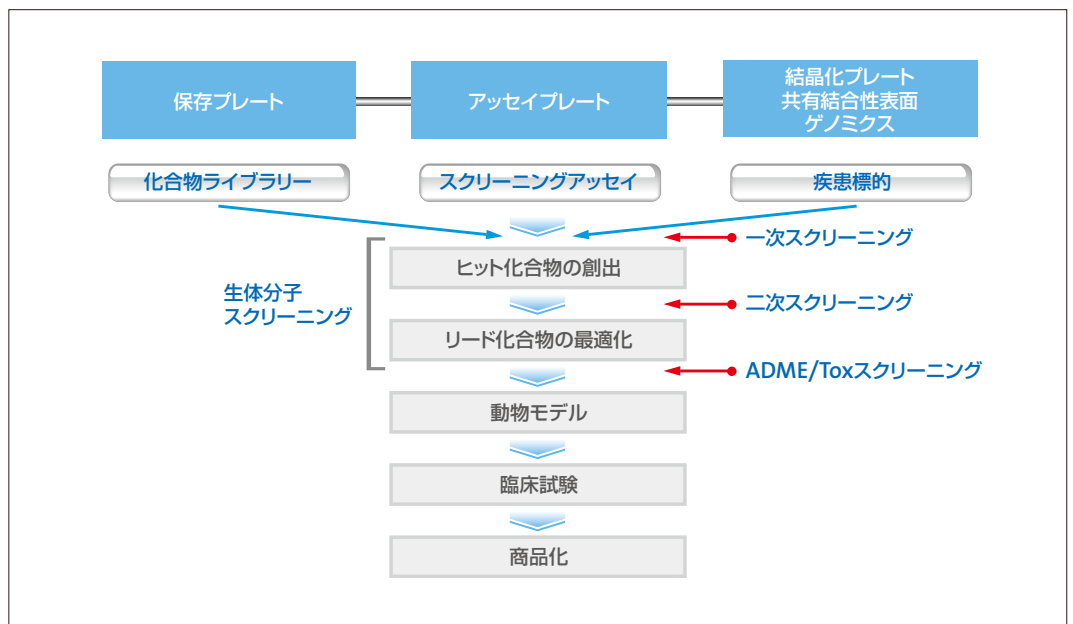

## マイクロプレートアッセイ選択手順の要約

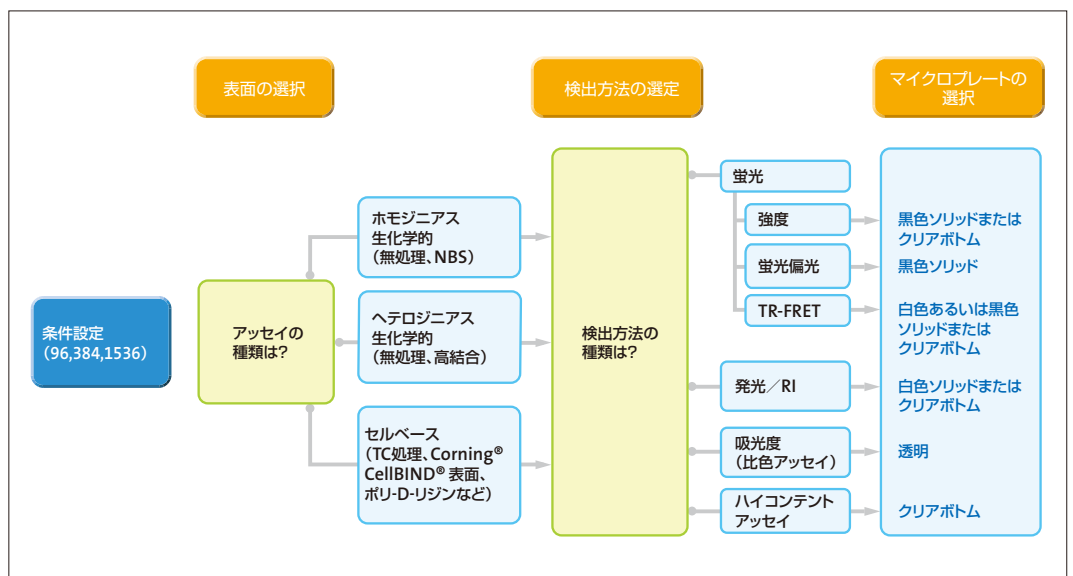

## マイクロプレートの選択

### マイクロプレートの材質と色の選択

コーニングでは、様々な用途に対応するため、マイクロプレートに異なるポリマーを使用しています。適切なポリマー材料と色を選択することによりアッセイの性能が向上します。主要なポリマーに関するその他の技術情報についてはこのカタログの巻末にある参考資料に記載しております。

プレート材質	マイクロプレートのフォーマット					
	96ウェル	96ウェル ストリップウェル	96ウェル (ハーフエリア)	384ウェル	384ウェル (ローボリューム)	1536ウェル
ポリスチレン (透明)	■	■	■	■		
ソリッドポリスチレン (黒、白)	■	■	■	■	■	■
クリアボトムポリスチレン (黒、白)	■		■	■	■	■
ポリプロピレン	■			■		
ソリッドポリプロピレン (黒、白)	■			■*		
サイクリック オレフィン コポリマー (COC)			■	■		■
ポリ塩化ビニル (PVC)	■					
UV	■		■			
ガラスボトム、COC (黒)			■	■		

\*ポリプロピレン製 (黒) のみを販売しています。

### シグナル／ノイズ比を向上するための正しいマイクロプレートの選択

- ▶ 透明
- ▶ 白
- ▶ 黒
- ▶ 白クリアボトム
- ▶ 黒クリアボトム

**黒** — 蛍光のバックグラウンドが低く、クロストークも低くなります。Corning® マイクロプレートで使用している黒色は、バックグラウンドを抑え、光の散乱も同様に抑えます。その結果、高いシグナル／ノイズ比が得られます。

**白** — 発光のシグナル／ノイズ比を増幅します。白色は光が反射して検出器の光が増します。

## 表面処理はアッセイ感度を改善

コーニングでは、様々な表面処理のマイクロプレートを提供しています。

- ▶ **無処理(中結合)ポリスチレン表面**は、疎水性であり、受動的な相互作用により生体分子が結合します。主に、表面と相互作用する疎水性領域を持つ高分子(抗体など)の固定化に適しています。
- ▶ **高結合表面**には、イオン基およびまたは疎水性領域を持つ高分子量 (>10kDa) の生体分子を結合させることができます。
- ▶ **ノンバイディングサーフェイス (NBS)** は、コーニングが独自開発した処理技術で、ポリスチレン製マイクロプレートに使用されています。分子間相互作用が最小となる非イオン性の親水性表面(ポリエチレンオキシド様)が形成されます。低濃度でのタンパク質、核酸の結合を減少させ、アッセイでのシグナル-ノイズ比を高めるのに最適です。
- ▶ **細胞培養表面処理(TC処理)**は、接着系細胞の接着と増殖に用いられます。
- ▶ **超低接着表面(ULA)**は、ハイドロゲルが共有結合しており、細胞接着、タンパク質の吸着、酵素活性化、細胞の活性化を最小限に抑えます。この表面は、細胞毒性、生物活性がなく、生物分解を受けません。
- ▶ **コーニング セルバインド表面 (Corning® CellBIND® 表面)** は、コーニングが独自に開発した表面処理で、細胞接着がより均一でむらがありません。
- ▶ **ポリ-D-リジン(PDL)コート表面**は、接着しにくい細胞の接着を促進します。
- ▶ **細胞外基質コート表面**は、各種初代培養や細胞株の無血清または血清含有培地における細胞接着、伸展、増殖および分化を促進します。コラーゲン I、ゼラチン、マトリゲル基底膜マトリックス、フィブロネクチン、ラミニン、ラミニン/フィブロネクチン、ラミニン/ポリ-D-リジン、ラミニン/ポリ-L-オルニチンコートをご用意しております。

## コーニング表面処理の選択

コーニングでは、様々な修飾を施した表面のポリスチレン製マイクロプレートを提供しています。これらの表面は細胞、タンパク質、核酸、その他の生体分子の結合や固定化をサポートします。主要なポリマーに関するその他の技術情報についてはこのセクションの末にある参考資料に記載しております。

### 表面処理の選択

表面処理	マイクロプレートのフォーマット					
	96 ウェル	96ウェル ストリップウェル	96ウェル (ハーフエリア)	384 ウェル	384ウェル (ローボリューム)	1536 ウェル
<b>ジェネラルアッセイ用</b>						
無処理 (中結合)	■	■	■	■	■	■
高結合	■	■	■	■	■	■
ノンバイディング (NBS)	■		■	■	■	■
<b>細胞培養用</b>						
細胞培養表面処理 (TC)	■	■	■	■	■	■
超低接着表面	■			■		■
Corning CellBIND 表面	■			■		■
ポリ-D-リジンコート	■			■	■	
コラーゲンコート	■			■		■

表面、フォーマットとプレートカラーによるマイクロプレートの選択

フォーマットと色	ECMコート済み Corning® BioCoat®										合成 Corning PureCoat™	細胞培養 表面処理	
	コラーゲン I	コラーゲン IV	ポリ-D-リジン	ポリ-L-リジン	ゼラチン	マトリゲル基 マトリックス	フィブロネクチン	ラミニン	ラミニン/ ポリ-D-リジン	ラミニン/ ポリ-L-オルニチン	アミン	Falcon®	Corning プライマリア
<b>96ウェル</b>													
透明	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
白	■		■									■	
黒												■	
白クリアボトム	■		■									■	
黒クリアボトム	■		■			■					■	■	
<b>384ウェル</b>													
透明	■		■									■	
白	■		■									■	
黒												■	
白クリアボトム	■		■									■	
黒クリアボトム	■		■			■					■	■	




アッセイタイプ	ECMコーティング Corning® BioCoat®								合成 Corning PureCoat™	細胞培養用		
	コラーゲン I	コラーゲン IV	ポリ-D-リジン	ポリ-L-リジン	ゼラチン	マトリゲル基礎膜 マトリックス	フィブロネクチン	ラミニン	ラミニン/ ポリ-D-リジン	ラミニン/ ポリ-L-オルニチン	アミン	Falcon®
Ion channel/Calcium flux (FLIPR®)	■		■	■						■	■	■
GPCR (Active/Inactive)	■		■	■						■	■	■
細胞毒性	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
細胞増殖	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
細胞培養	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
分化(初代細胞)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
細胞遊走							■					
レポータージーン	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■
神経突起伸長	■					■	■	■	■	■		■

細胞株	ECMコーティング Corning BioCoat								合成 Corning PureCoat	細胞培養用	
	コラーゲン I	コラーゲン IV	ポリ-D-リジン	ポリ-L-リジン	フィブロネクチン	ラミニン	ラミニン/ ポリ-D-リジン	ラミニン/ ポリ-L-オルニチン	アミン	Falcon	Corning プライマリア
HEK-293	■		■	■	■				■		■
CHO	■		■	■					■	■	■
Primary cells			■	■	■	■	■	■	■		■
HeLa										■	
HEPG2	■								■	■	
COS-7			■	■						■	■
SH5Y	■	■				■	■	■			
CaCo	■									■	
BHK			■	■	■				■	■	■
Vero										■	
hMSCs							■	■	■	■	

## 表面特性

## Corning® 超低接着表面マイクロプレート

Corning 超低接着表面マイクロプレートには共有結合した親水性のハイドロゲル層があり、細胞接着、タンパク質の吸着、酵素活性化、細胞の活性化が最小限に抑えられます。この表面は、細胞毒性、生物活性がなく、生物分解を受けません。

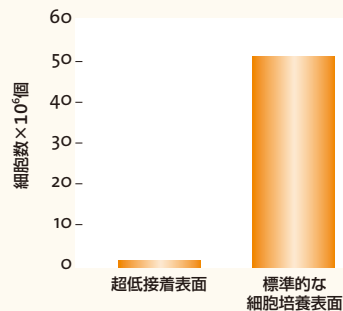

超低接着表面ディッシュと標準的な細胞培養表面処理プレートの細胞接着数の比較

Vero細胞を各ウェルに $2.6 \times 10^6$ 個播種し、5%CO<sub>2</sub>、37℃で4日間培養しました。超低接着表面では標準的な細胞培養表面処理と比較して細胞接着が99%減少しました。

## 高結合プレート(コーニングEIA/RIA用マイクロプレート)の保証値

コーニングが提供する96ウェルEIA/RIA用プレートとストリップウェルマイクロプレートはメディカルグレードのポリスチレンを使用して製造しているため、結合が均一で透明度が高く、バックグラウンド吸収が低くなります。

規格	高結合	中結合(無処理)
ウェル間の結合力のばらつき(CV値)	≤3%	≤5%
結合力の最高値、最低値の平均値からの差違	≤8%	≤15%
バックグラウンドの吸光度の平均値からの差違	±0.005	±0.005

コーニングの高結合プレートはマウスIgGを約500 ng/cm<sup>2</sup>結合する能力があります。表面処理を施していないプレートはマウスIgGを約250 ng/cm<sup>2</sup>結合する能力があります。コーニングではロットごとにEIA/RIA用プレートの検査を実施しています。ご希望の方は弊社まで直接ご連絡ください。さらに、ELISAに関する技術資料がございますので、[www.corning.com/jp/lifesciences](http://www.corning.com/jp/lifesciences)をご参照ください。

## ノンバイディングサーフェスの結合性能


ノンバイディングサーフェスマイクロプレートのウェルは非イオン性の親水性表面です。ホモジニアスアッセイでのタンパク質の結合を最小限に抑えるのに最適です。

結合量 (ng/cm <sup>2</sup> )	<sup>125</sup> I-IgG	<sup>125</sup> I-BSA	<sup>125</sup> I-インスリン	<sup>32</sup> P-オリゴDNA	<sup>32</sup> P-λファージDNA
ポリスチレン	400	450	310	22	6
ポリプロピレン	380	440	370	3	< 2
NBS処理をしたポリスチレン	< 2.5	< 2.5	5	< 2	< 2

表面特性に関する追加情報とアプリケーションは44と45ページの参考資料を参照してください。

## 最大容量と推奨ワーキングボリューム

マイクロプレート	最大容量	ワーキングボリューム
96 ウェル	320 ~ 360 $\mu\text{L}$	50 ~ 200 $\mu\text{L}$
96 ウェルハーフエリア	190 $\mu\text{L}$	25 ~ 50 $\mu\text{L}$ (low end)
384 ウェル	125 $\mu\text{L}$	20 ~ 75 $\mu\text{L}$
384 ウェルローボリューム	35 $\mu\text{L}$	2 ~ 20 $\mu\text{L}$
1536 ウェル	10.7 ~ 12.8 $\mu\text{L}$	1 ~ 10 $\mu\text{L}$

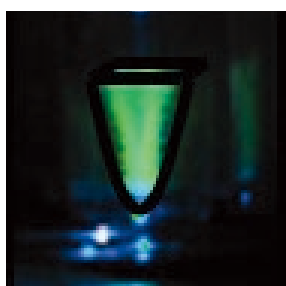

## ウェルの形状：どうして平底、丸底、V底やコニカル底？

- ▶ **平底**—ウェル底部から測定するプレートリーダーと細胞培養に適しています。
- ▶ **丸底**—混合と回収、サンプルを中心に集めたいアッセイに適しています (例えば、ホモジニアス セルベースアッセイ、浮遊細胞が底に落ちた後の読み取り)。
- ▶ **V底**—ウェル内の全内容物の回収が容易です。
- ▶ **イージーウォッシュ底**—イムノアッセイでの洗浄や測定に適しています。
- ▶ **コニカル底**—光効率を最大限にする光円錐形状に適したデザインです。

### ウェル形状の選択

ウェル形状	マイクロプレートのフォーマット					
	96ウェル	96ウェル ストリップウェル	96ウェル (ハーフエリア)	384ウェル	384ウェル (ローボリューム)	1536ウェル
平底	■	■	■	■	■	■
丸底	■			■	■	■
V底	■					
イージーウォッシュ底	■					

Corning 96ウェル、384ウェル、1536ウェルプレートのウェル容量、ワーキングボリューム、プレートサイズの詳細情報については各タイプのプレートの項に記載しております。

## 検出方法によるアッセイタイプ

- ▶ 比色アッセイ—吸光度
- ▶ 発光アッセイ—発光
- ▶ 蛍光アッセイ—蛍光
- ▶ ハイコンテンツアナリシス(HCA)

## バーコードのオーダーメイド

### 一般的なバーコード

コーニングは、お客様のスクリーニングの要求にあった一般的なバーコードのマイクロプレート製品ラインを提供しています。

- ▶ リードタイムが不要です。
- ▶ 表面識別：マイクロプレートの表面処理は、人が判別できるようバーコードに記載してあります。  
NT：ノントリートメント  
TC：細胞培養用  
CB：Corning® CellBIND® 表面  
NBS：ノンバインディング表面
- ▶ ラベルは、マイクロプレートの4か所すべてに添付されており、スキャンロケーションにかかわらず使用できるようになっております。
- ▶ 各マイクロプレートは、静電気の影響を抑える特別な処理をしております。
- ▶ コード128バーコードフォーマットは、多くのバーコードスキャンとソフトウェアシステムに適合することを確認しております。



### カスタムデザインのバーコード

コーニングのマイクロプレートに高品質のバーコードラベルを添付するサービスをご提供しています。バーコードは、最適に読み取れるように品質テストを行っており、薬剤耐性や温度耐性があります。

- ▶ ご依頼から短時間でご提供します。
- ▶ オートメーションシステムで使用しやすいバルクパッケージ包装です。
- ▶ フレキシブルなバーコード読み取りが可能です。例えば、CODE128、Code 3 of 9 や ITF 2 of 5 等があります。
- ▶ バーコード貼り付け位置は、左詰め、中央、右詰めからフレキシブルに選択できます。
- ▶ 繰り返し番号のないバーコードの並びは、ラベルの重複を避けられます。
- ▶ メタノール、DMSO、塩化メチレン、酢酸エチルへの溶媒耐性があります。
- ▶ 長時間に渡る-80℃~120℃での使用に耐えられます。
- ▶ 自動化装置との相性を確認するためにバーコードプレートのサンプルをご提供いたします。



### 信頼のおける耐久性

バーコードは可読性、耐薬品性、温度変化について品質試験を受けています。

### 専門的なアドバイス

ほとんどのCorning マイクロプレートはバーコードのオーダーメイドに対応できます。詳細情報については直接弊社までご連絡ください。

## 比色アッセイ

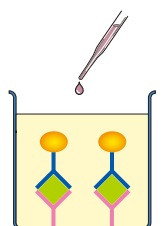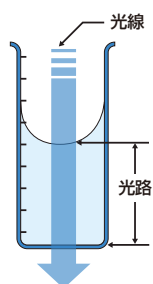

Y 抗体1  
◆ 標的分子  
Y HRPタグ抗体2

### 概要


- ▶ 分光光度計を使用して、サンプルの吸光度の変化を測定
- ▶ 酵素が無色の基質を有色の生成物に変換する
- ▶ 色の变化は反応が起きたことを示す
- ▶ 得られるシグナル-OD (光学濃度)
- ▶ 好ましいマイクロプレート
  - 可視光を透過させる
  - 低吸収/バックグラウンド
  - 全透明プレートまたはクリアボトムプレート

### アプリケーション例

#### 1. ヘテロジニアス比色アッセイ-ELISA


- ▶ アプリケーション
  - 血液または体液中の標的分子を検出/測定
  - 細胞抽出液中の標的分子を分析
  - 組織サンプルから遊離したDNA分子の検出
- ▶ マイクロプレートの必要要件
  - 可視光を透過させる
  - 良好な結合能力(高または中間のマイクロプレートへの結合)

#### 2. チロシンホスファターゼ活性測定: EMDs PTP1B キット

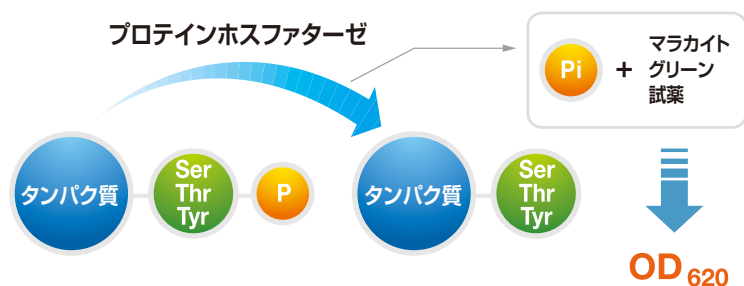

- ▶ マイクロプレートの必要要件
  - 光を透過させる
  - 低非特異的結合(無処理マイクロプレート)

#### 3. MTT細胞増殖アッセイ(比色系)

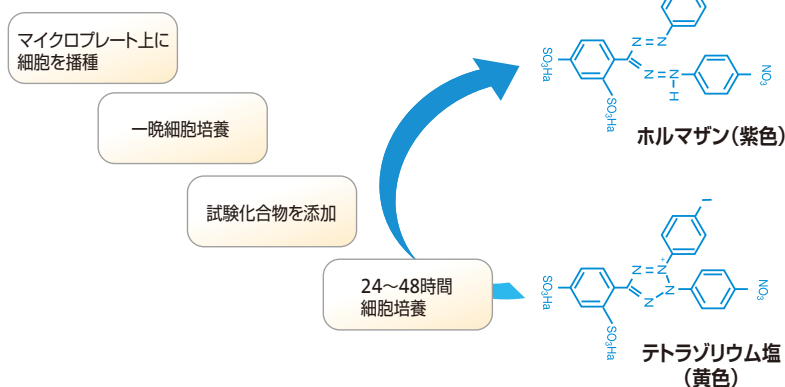


- ▶ マイクロプレートの必要要件
  - 光を透過させる
  - 良好な細胞接着(TC処理、Corning® CellBIND® 表面、ポリ-D-リジンなど)


## 発光アッセイ

### 概要


- ▶ 化学反応または生物学反応により生じた光がシグナルとなる
- ▶ シグナル=RLU (relative luminescent unit、相対発光ユニット)またはCPS (カウント/秒)

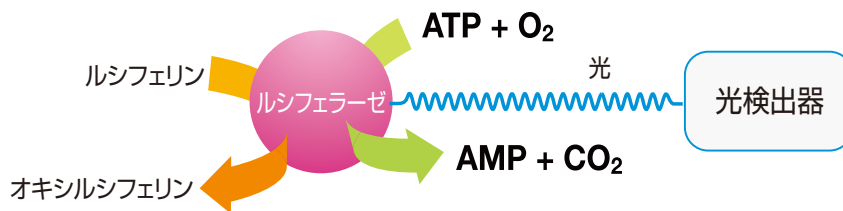

### 物質の光学特性

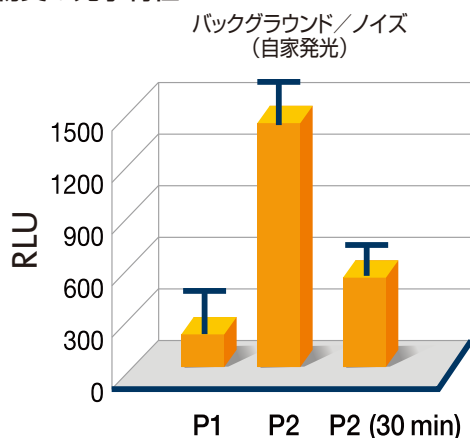



バックグラウンドの発光は、マイクロプレートを使用前に暗所に保管することにより低減可能。

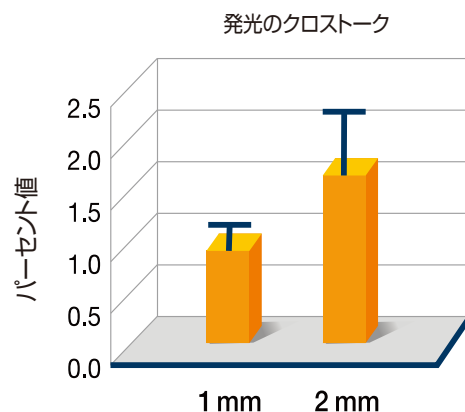

計器の設定はクロストークに影響を及ぼす


### アプリケーション

#### 1. レポーター遺伝子アッセイ(セルベース)

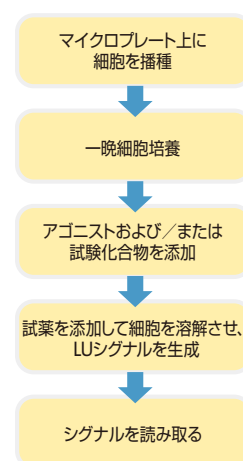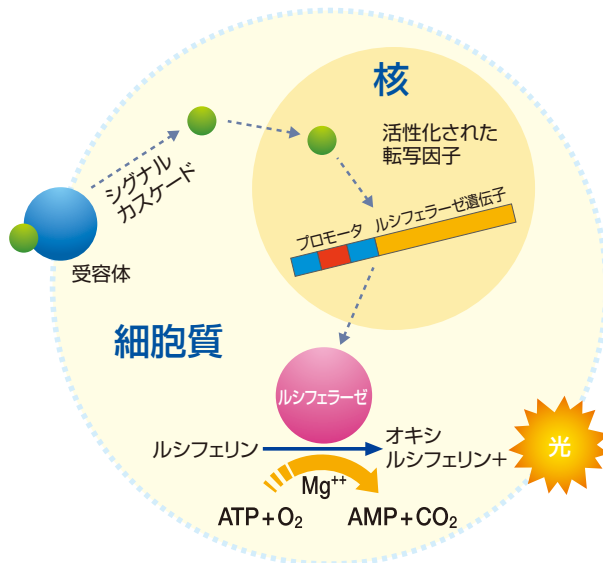


- ▶ マイクロプレートの必要要件
  - 白色ソリッドマイクロプレート
  - 良好な細胞接着(TC処理)

## 2. ビーズベースのホモジニアスアッセイ-PerkinElmer AlphaScreen® アッセイ

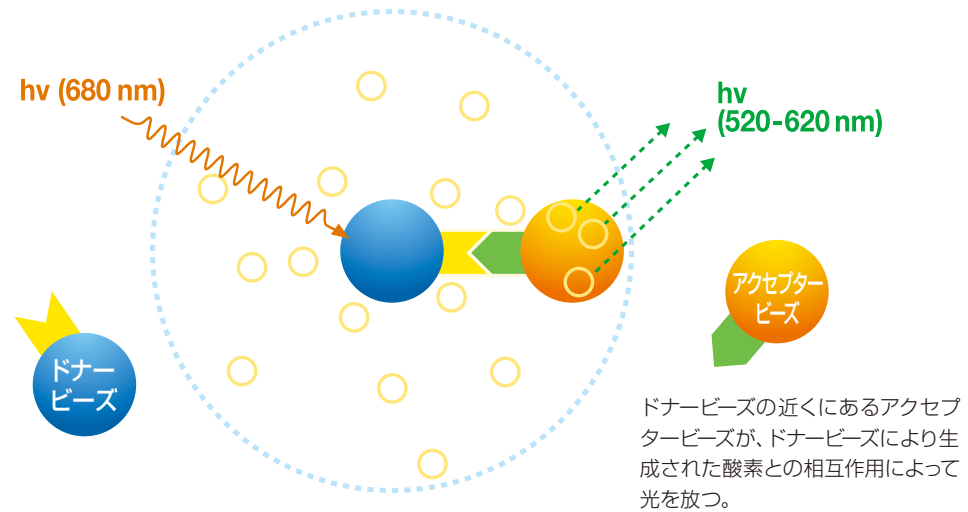



- ▶ マイクロプレートの必要要件
  - 白色ソリッドマイクロプレート
  - 低非特異的結合(無処理またはNBSマイクロプレート)

## 3. エクオリン $Ca^{2+}$ Fluxアッセイ

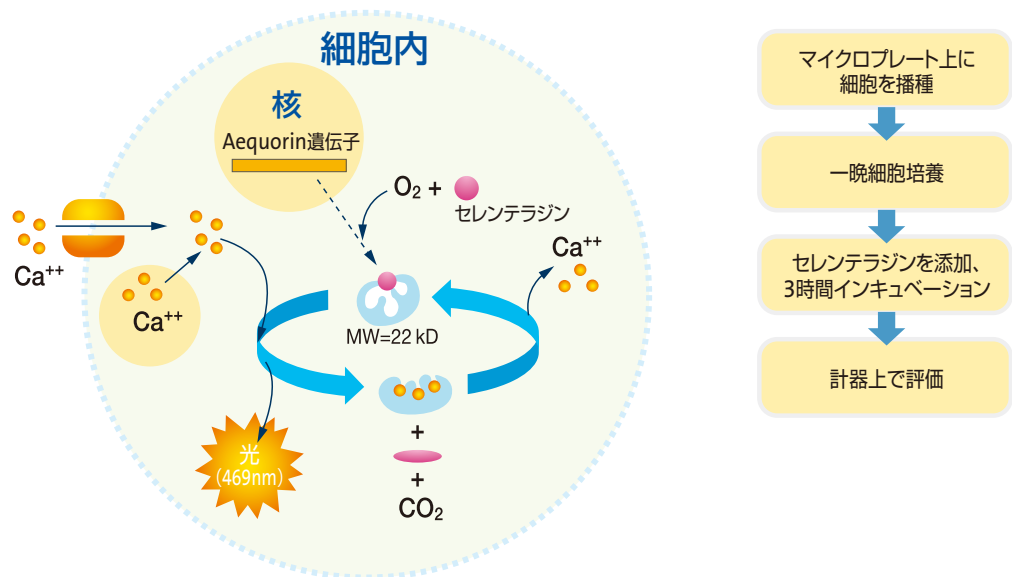

- ▶ マイクロプレートの必要要件
  - 白色クリアボトムマイクロプレート
  - 優れた細胞接着(TC処理、Corning® CellBIND® 表面、ポリ-D-リジンなど)

#### 4. ホモジニアスアッセイ—Promega Kinase-Glo®アッセイ

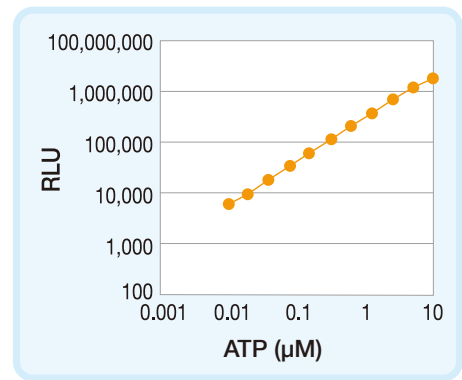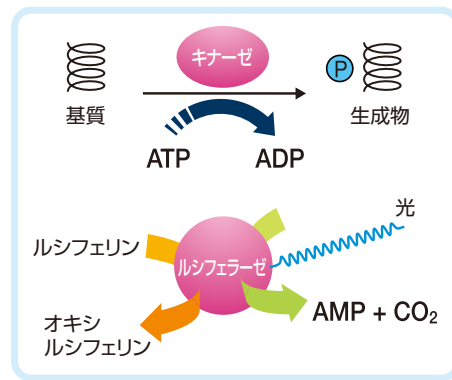


- ▶ マイクロプレートの必要要件
  - 白色ソリッドマイクロプレート
  - 低非特異的結合(無処理またはNBSマイクロプレート)

#### 蛍光アッセイ

##### 概要

- ▶ 蛍光は、最も多様に利用される検出方法です
- ▶ シグナル=RFU (relative fluorescent units、 相対蛍光ユニット)


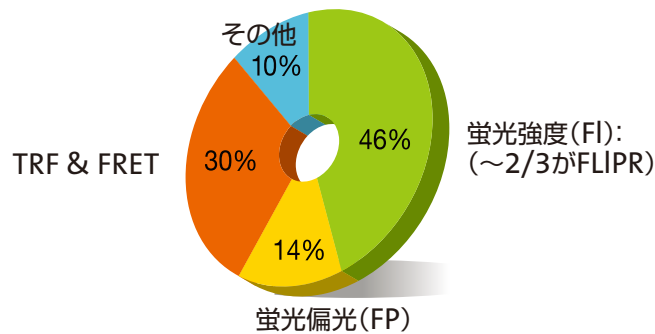


TRF=時間分解蛍光  
FRET=蛍光共鳴エネルギー移動





蛍光強度

- ▶ 蛍光色素の使用を含む
- ▶ アプリケーション
  - FLIPR® アッセイ (Ca<sup>2+</sup> Flux、膜電位など)
  - ADME/Toxスクリーニングの細胞生存率アッセイ

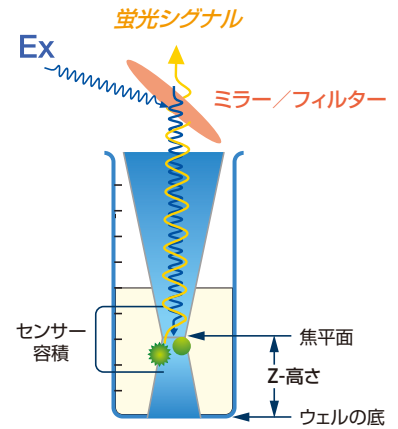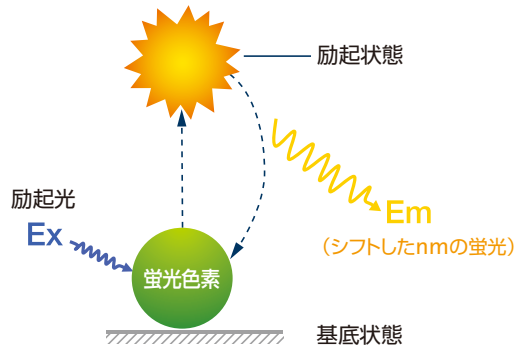


アプリケーション

- ▶ Calcium Fluxアッセイ

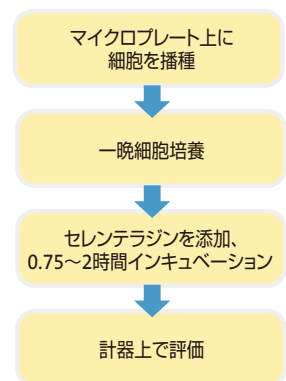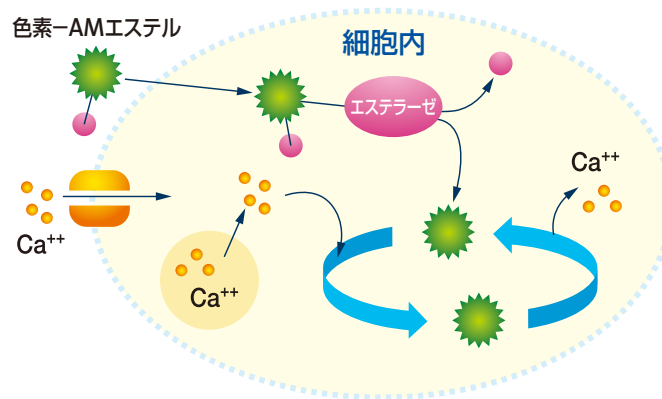


- ▶ マイクロプレートの必要要件
  - 黒色クリアボトムマイクロプレート
  - 優れた細胞接着 (TC処理、Corning® CellBIND® 表面、ポリ-D-リジンなど)

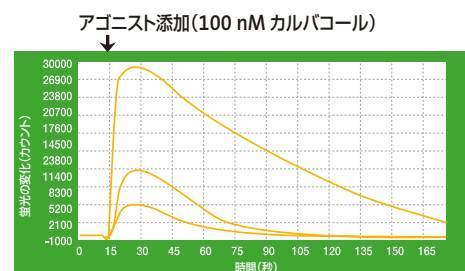

## TR-FRET 技術

- ▶ 時間分解蛍光 (TRF) は、蛍光シグナルを検出する方法です
- ▶ 蛍光共鳴エネルギー移動 (FRET) は物理現象です

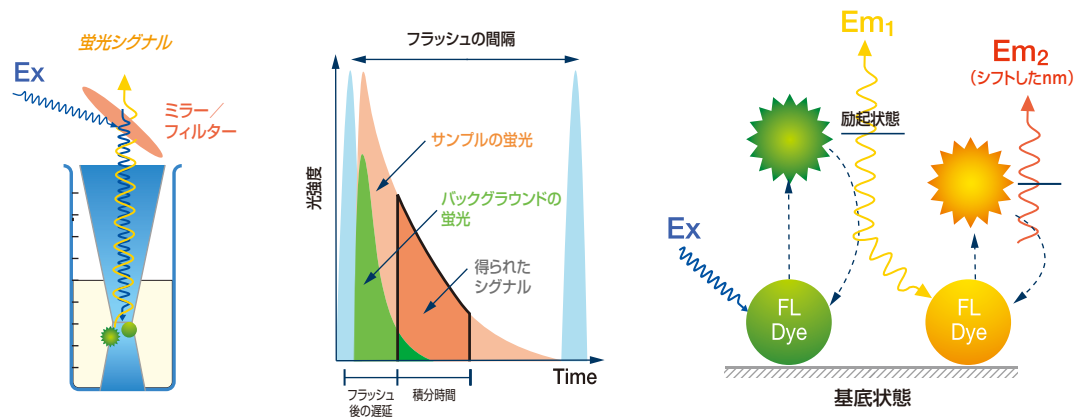


### ▶ 長所

- 分子サイズの制限がない
- バックグラウンドの蛍光が低いため、シグナルは特異的
- シグナルは、レシオメトリック  
シグナル =  $Em_2/Em_1$  または  $Em_1/Em_2$   
(調剤エラーは式から外れる。)
- 全体的なシグナルレベルは低い
- マイクロプレートの必要要件
  - 主にソリッド着色プレート
  - マイクロプレートは黒色と白色の両方の色を使用できるが、TRF法には白色マイクロプレートの使用が勧められる
  - クリアボトムマイクロプレートも同様に使用できる
  - メニスカスを検出器近くに押し出すウェルの設計が優れている


アプリケーション

1. Z-lite キナーゼ/ホスファターゼアッセイ


▶ このアッセイには、NBSマイクロプレートが必要です

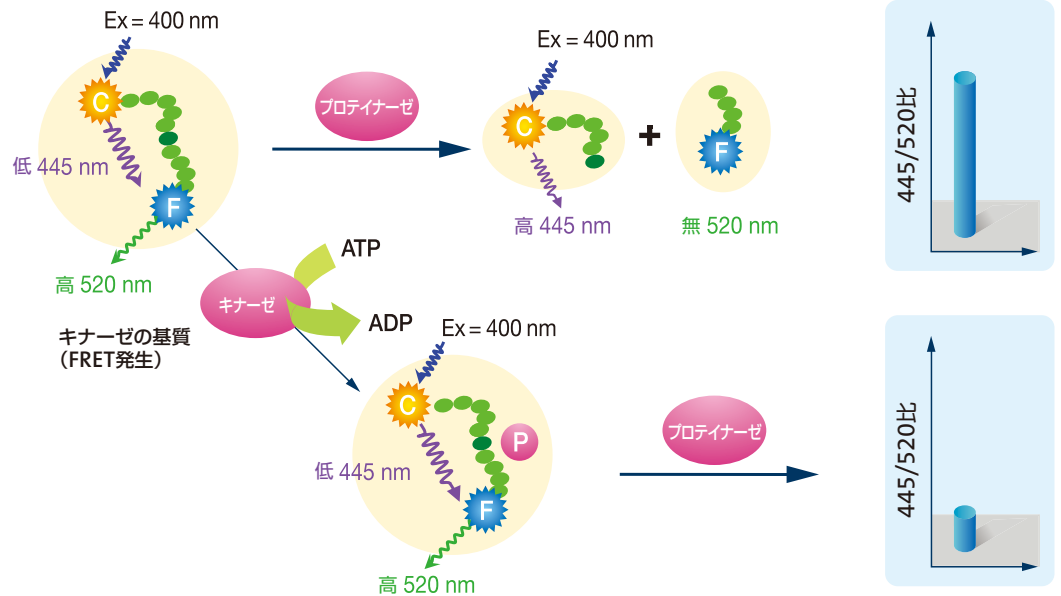


2. HTRF cAMPアッセイ

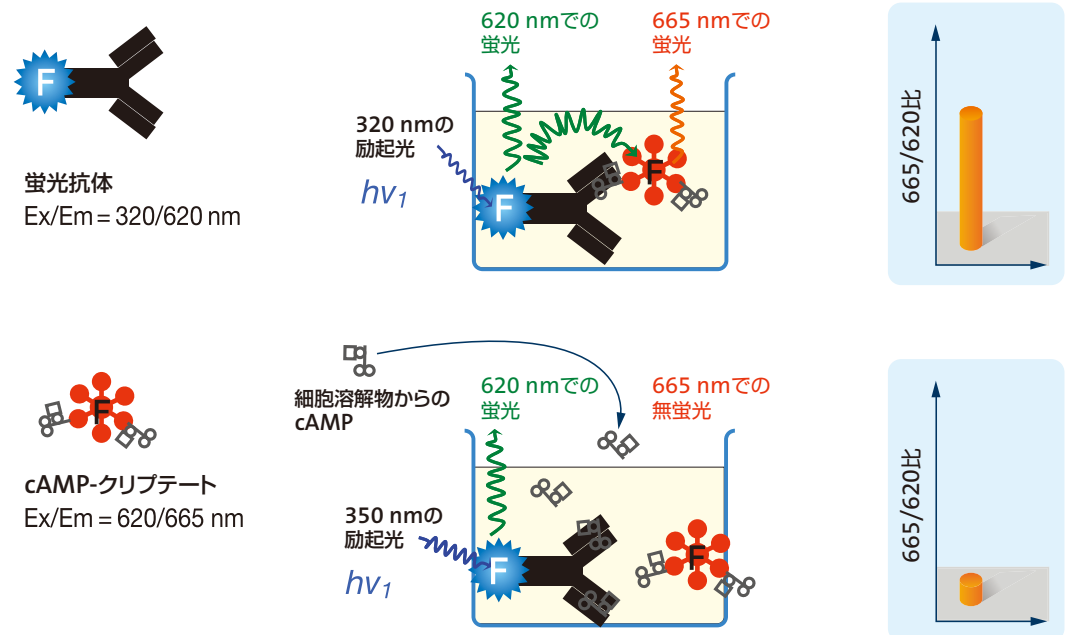

### 3. LANCE® cAMPアッセイ

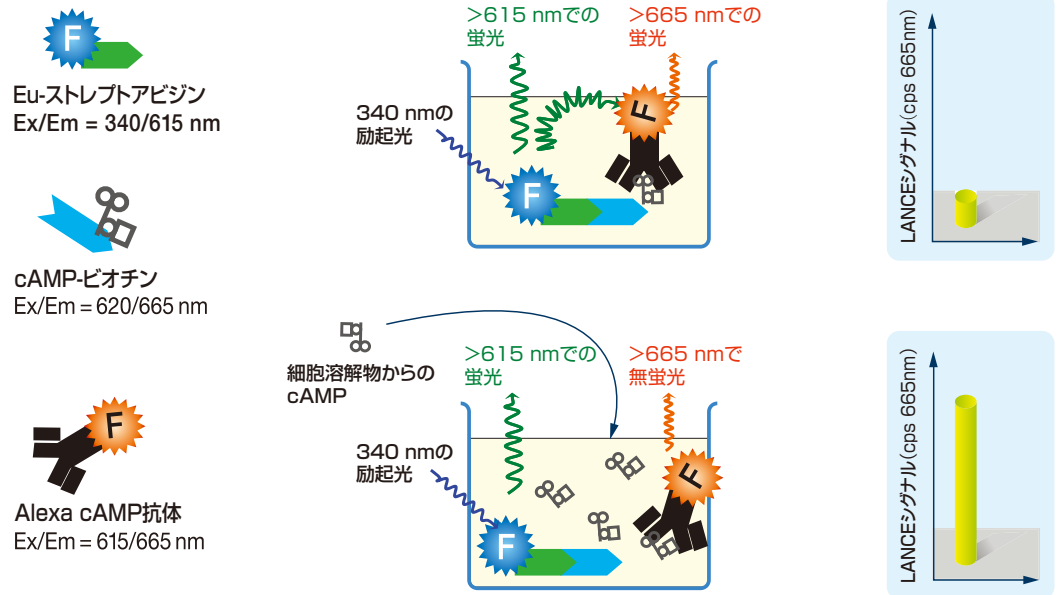

### 4. βラクタマーゼレポーター遺伝ンアッセイ

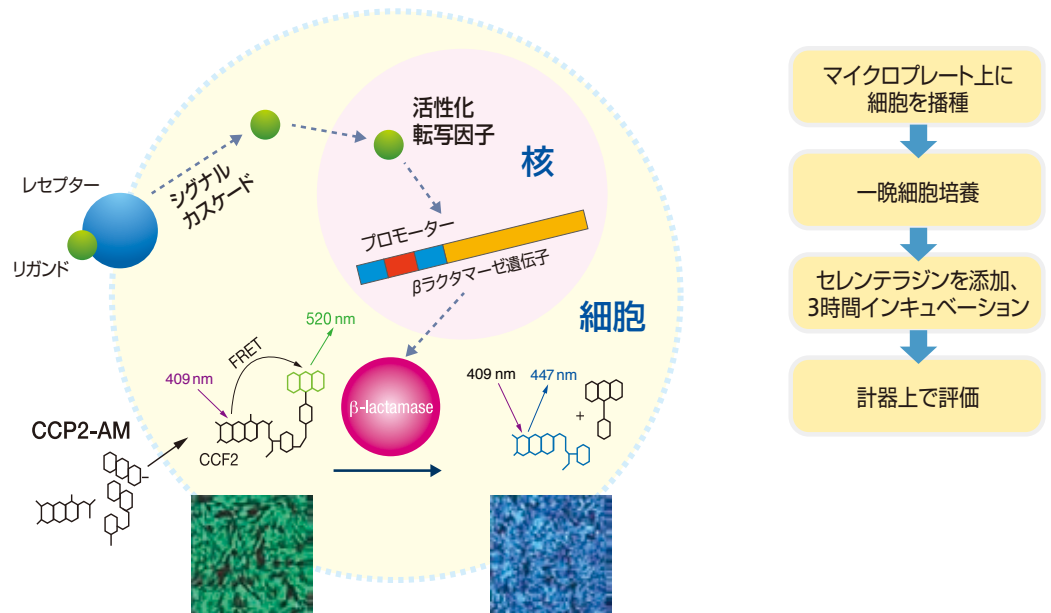


- ▶ マイクロプレートの必要要件
  - 黒色マイクロプレートと白色マイクロプレートの両方で使用できる
  - 優れた細胞接着(TC処理、Corning® CellBIND® 表面、ポリ-D-リジンなど)

## ハイコンテンツアッセイ

### 概要

- ▶ 接着細胞を使用したセルベースアッセイ
- ▶ ほとんどのハイコンテンツイメージャーは、蛍光読みとり(共焦点、レーザー走査型など)に適応
- ▶ マイクロプレートの重要な属性
  - 平面性
  - 厚さ
  - ウェル底の高さ(WBE)
  - 表面
- ▶ アプリケーション
  - 形態変化
  - 分子局在
  - シグナル転位(一時的な変化)
  - 分子相互作用(FRET)



### ハイコンテンツアッセイのためのマイクロプレートの重要な属性

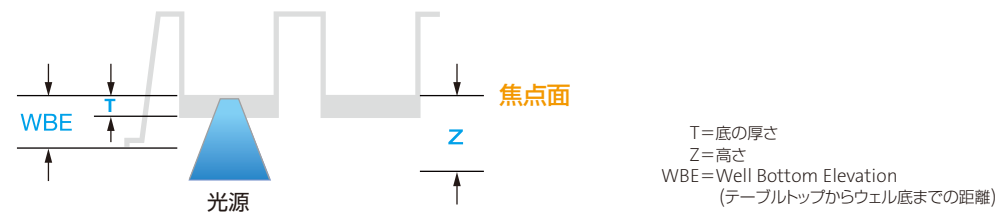

### アプリケーション

#### 1. 形態変化


- ▶ 神経突起伸長アッセイ

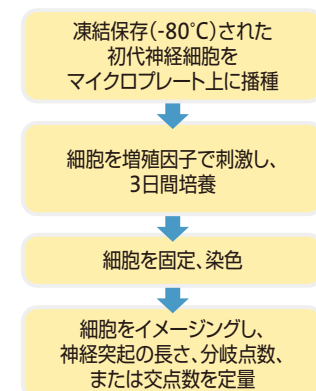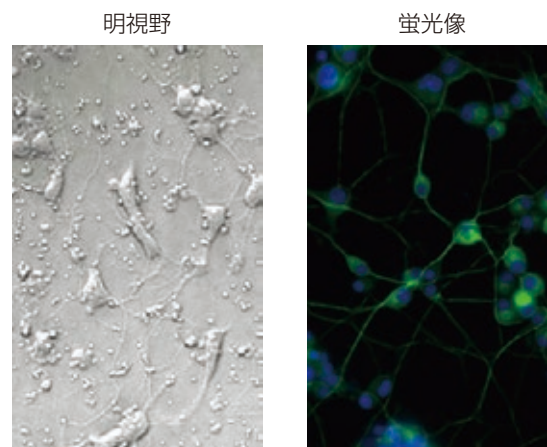

- ▶ マイクロプレートの必要要件
  - クリアボトムマイクロプレート
  - 優れた細胞接着(TC処理、Corning® CellBIND® 表面、ポリ-D-リジンなど)

2. シグナルトランスロケーション

▶ Transfluo<sup>®</sup> Technology (Molecular Devices<sup>®</sup>)

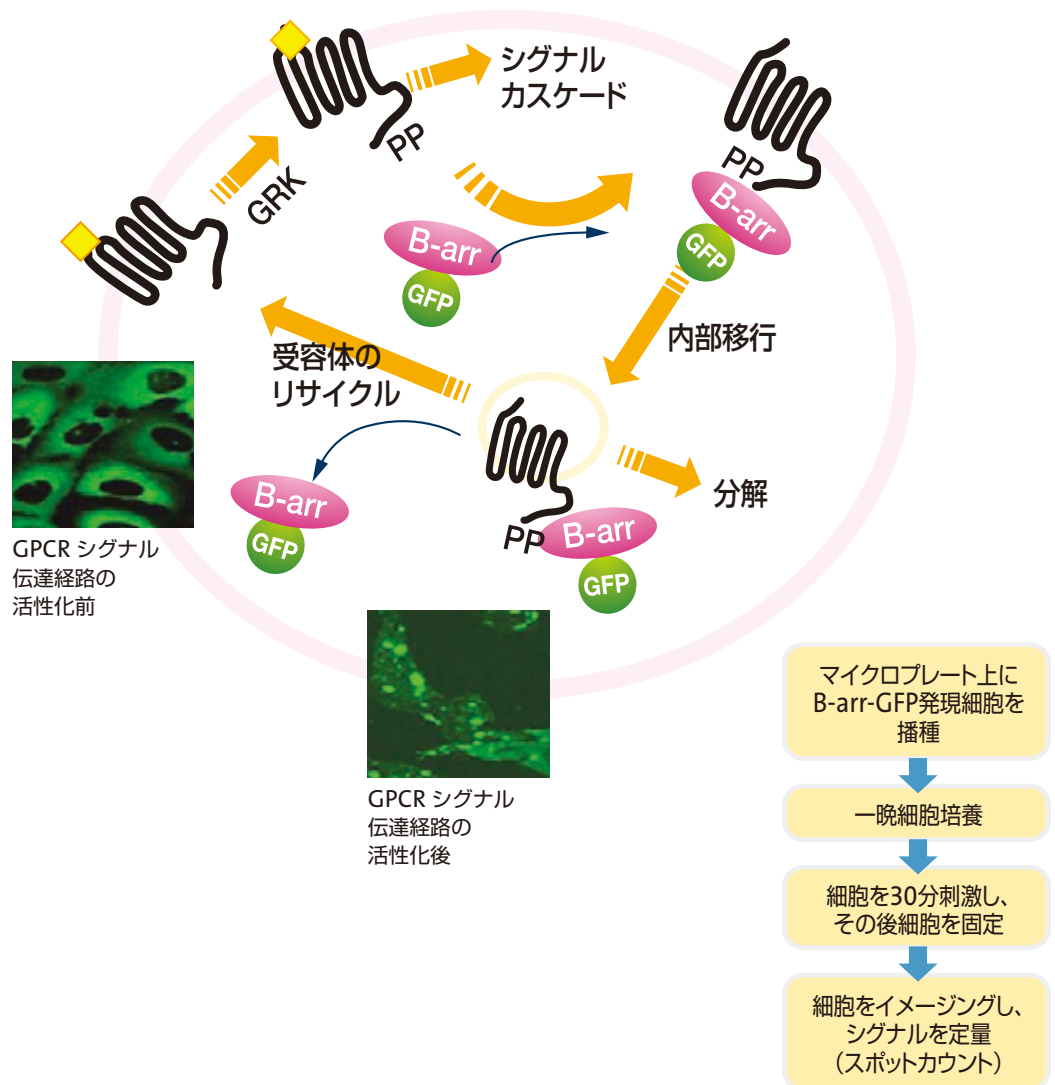

▶ マイクロプレートの必要要件

- 黒色クリアボトムマイクロプレート
- 良好な細胞接着 (TC処理、Corning<sup>®</sup> CellBIND<sup>®</sup> 表面、ポリ-D-リジンなど)

# マイクロプレートセレクションガイド

## Corning® と Falcon® 96 ウェル マイクロプレート

コーニングでは実験の高密度化やオートメーション化に適した様々な96ウェルマイクロプレートを提供しています。マイクロプレートは以下のような様々な用途にご使用いただけます。

- ▶ 96ウェルアッセイ用マイクロプレート
  - ジェネラルアッセイ用—無処理、ノンバイディングサーフェイス(以下NBSとする)、高結合、ポリ塩化ビニル(PVC)、UVマイクロプレート
  - セルベースアッセイ用—細胞培養処理表面、Corning CellBIND® 表面、Corning BioCoat®、Corning Primaria™、Corning PureCoat™、超低接着表面マイクロプレート
  - イムノアッセイ用—EIA/RIA用(中結合および高結合)
- ▶ 96ウェルストリップウェルマイクロプレート
- ▶ 96ウェルストレージマイクロプレート、クラスターチューブ

このセレクションガイドには、PCR用とジェノミクスの96ウェルマイクロプレートは含まれておりません。これらの製品の情報については、弊社までお問い合わせください。

マイクロプレートに関するその他の情報については、このガイドのはじめの方にあるマイクロプレートの選択手順でご確認ください。


コーニングでは様々な96ウェルアッセイ用マイクロプレートを提供しています。コーニングのアッセイ用マイクロプレートは5種類に分類されます。

- ▶ ポリスチレン製マイクロプレート(透明)
- ▶ ポリスチレン製ソリッドマイクロプレート(黒、白)
- ▶ ポリスチレン製クリアボトムマイクロプレート(黒、白)
- ▶ UVマイクロプレート
- ▶ ポリ塩化ビニル(PVC)製マイクロプレート(透明)

コーニングのポリスチレン製96ウェルプレートは標準容量とハーフエリアプレートという低容量のフォーマットで提供しています。コーニングのポリスチレン製96ウェルプレートの寸法は127.76 × 85.48 × 14.22 mm (横 × 縦 × 高さ)で、業界の推奨規格に適合しています。


96ウェルプレート	ウェル底部の形状	1ウェル当たりの最大容量 (μL)	ワーキングボリューム (μL)
標準	平底	360	75 ~ 200
標準	丸底	330	75 ~ 200
標準	V底	320	75 ~ 200
標準	イージーウォッシュ底	360	75 ~ 200
ハーフエリア、ソリッド	平底	190	25 ~ 125
ハーフエリア、クリアボトム	平底	205	25 ~ 125

### 96ウェルの形状と規格

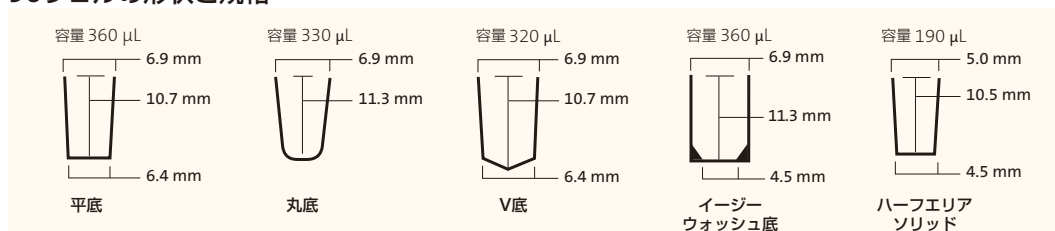

コーニング細胞培養表面処理マイクロプレートには、他の培養容器と同様の表面処理が施されています。コーニングでは従来の表面以外に、細胞接着がより均一でむらのないCorning CellBIND表面処理、接着しにくい細胞株の接着を促進するポリ-D-リジン、コラーゲン、細胞接着を最小限に抑える超低接着表面などの表面を提供しています。

## Corning® 96 ウェル ポリスチレン製マイクロプレート (透明)

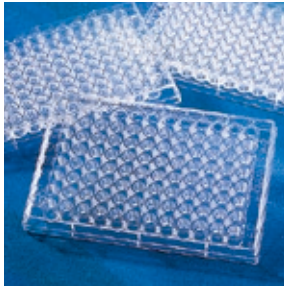

96ウェルマイクロプレート(透明)

- ▶ 細胞培養用プレートは滅菌済みで、ノンパイロジェニックです。
- ▶ フタ付きのプレートもございます（フタやその他のマイクロプレート用アクセサリに関する情報は42ページに掲載しております）。

**Corning CellBIND®**  
 表面はセルベース  
 アッセイに最適です。

- ▶ 96ウェルと384ウェルのクリアボトムマイクロプレート（黒）と、96ウェルのソリッドマイクロプレート（透明）があります。
- ▶ 表面処理により、細胞接着がより均一でむらげできません。接着しにくい細胞の接着を促進します。
- ▶ コーティングが施されていないので特別な取り扱いを必要とせず、室温でも安定です。
- ▶ 滅菌済み
- ▶ ノンパイロジェニック

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格 (円) 単価	ケース価格
3360	標準タイプ、フタなし	透明	丸底	細胞培養表面処理	済み	25枚 / 包	100枚	515	51,500
3366	標準タイプ、フタなし	透明	丸底	高結合	なし	25枚 / 包	100枚	481	48,100
3367	標準タイプ、フタなし	透明	丸底	無処理	済み	個別包装	50枚	444	22,200
3788	標準タイプ、フタ付き	透明	丸底	無処理	済み	20枚 / 包	100枚	503	50,300
3795	標準タイプ、フタなし	透明	丸底	無処理	済み	25枚 / 包	100枚	417	41,700
3797	標準タイプ、フタなし	透明	丸底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	328	32,800
3798	標準タイプ、フタなし	透明	丸底	プラズマ処理*	なし	25枚 / 包	100枚	366	36,600
3799	標準タイプ、フタ付き	透明	丸底	細胞培養表面処理	済み	個別包装	50枚	596	29,800
3358	標準タイプ、フタ付き	透明	丸底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	594	59,400
7007	標準タイプ、フタ付き	透明	丸底	超低接着表面	済み	個別包装	24枚	1,925	46,200
3894	標準タイプ、フタ付き	透明	V底	細胞培養表面処理	済み	個別包装	50枚	772	38,600
3896	標準タイプ、フタなし	透明	V底	無処理	済み	個別包装	48枚	446	21,400
3897	標準タイプ、フタなし	透明	V底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	378	37,800
3898	標準タイプ、フタなし	透明	V底	プラズマ処理*	なし	25枚 / 包	100枚	378	37,800
3300	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	Corning CellBIND	済み	5枚 / 包	50枚	664	33,200
3361	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	高結合	済み	20枚 / 包	100枚	596	59,600
3370	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	無処理	済み	20枚 / 包	100枚	503	50,300
3474	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	超低接着表面	済み	個別包装	24枚	1,925	46,200
3585	標準タイプ、フタ付き**	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	5枚 / 包	50枚	582	29,100
3590	標準タイプ、フタなし	透明	平底	高結合	なし	個別包装	100枚	466	46,600
3591	標準タイプ、フタなし	透明	平底	無処理	なし	個別包装	50枚	454	22,700
3595	標準タイプ、フタ付き**	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	個別包装	50枚	592	29,600
3596	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	個別包装	50枚	582	29,100
3598	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	5枚 / 包	100枚	551	55,100
3599	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	個別包装	100枚	581	58,100
3628	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	551	55,100
3641	標準タイプ、フタなし	透明	平底	NBS	なし	25枚 / 包	100枚	907	90,700
3841	標準タイプ、フタ付き**	透明	平底	ポリ-D-リジン	済み***	20枚 / 包	100枚	2,469	246,900
3997	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚 / 包	50枚	582	29,100
9017	標準タイプ、フタなし	透明	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	402	40,200
9018	標準タイプ、フタなし	透明	平底	高結合	なし	25枚 / 包	100枚	456	45,600
9102	8ウェルストリップタイプ フタ付き	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	個別包装	50枚	1,202	60,100
3690	ハーフエリアプレート、 フタなし	透明	平底	高結合	なし	25枚 / 包	100枚	519	51,900
3695	ハーフエリアプレート、 フタなし	透明	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	479	47,900
3696	ハーフエリアプレート フタ付き	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	個別包装	50枚	728	36,400
3697	ハーフエリアプレート フタ付き	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	692	69,200
3368	標準タイプ、フタなし	透明	イー ジー ウォッシュ底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	454	45,400
3369	標準タイプ、フタなし	透明	イー ジー ウォッシュ底	高結合	なし	25枚 / 包	100枚	492	49,200

\* 血球凝集反応などのアッセイに適しています。

\*\* 低蒸発構造のフタです。


\*\*\* 無菌的に製造しています。



## イムノアッセイ用

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
3797	標準タイプ、フタなし	透明	丸底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	328	32,800
3366	標準タイプ、フタなし	透明	丸底	高結合	なし	25枚 / 包	100枚	481	48,100
3368	標準タイプ、フタなし	透明	イーザーウォッシュ底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	454	45,400
3369	標準タイプ、フタなし	透明	イーザーウォッシュ底	高結合	なし	25枚 / 包	100枚	492	49,200
3591	標準タイプ、フタなし	透明	平底	無処理	なし	個別包装	50枚	454	22,700
9017	標準タイプ、フタなし	透明	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	402	40,200
3361	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	高結合	済み	20枚 / 包	100枚	596	59,600
3590	標準タイプ、フタなし	透明	平底	高結合	なし	個別包装	100枚	466	46,600
9018	標準タイプ、フタなし	透明	平底	高結合	なし	25枚 / 包	100枚	456	45,600

## Corning® 96 ウェル ポリスチレン製マイクロプレート (黒、白)

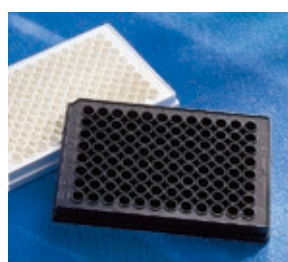


96ウェルマイクロプレート(黒、白)

- ▶ ウェル間のクロストークが抑えられます。
- ▶ 白色プレートでは発光シグナルは増強され、バックグラウンドの発光は抑えられます。
- ▶ 黒色プレートでは蛍光アッセイでのバックグラウンドが抑えられ、乱反射が最小限に抑えられます。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
3605	標準タイプ、フタなし	白	丸底	NBS	なし	25枚 / 包	100枚	1,103	110,300
3789A	標準タイプ、フタなし	白	丸底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	585	58,500
3792	標準タイプ、フタなし	黒	丸底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	585	58,500
4591	標準タイプ、フタ付き	黒	丸底	超低接着表面	済み	個別包装	24枚	2,175	52,200
3362	標準タイプ、フタなし	白	平底	細胞培養表面処理	済み	25枚 / 包	100枚	778	77,800
3600	標準タイプ、フタなし	白	平底	NBS	なし	25枚 / 包	100枚	1,036	103,600
3650	標準タイプ、フタなし	黒	平底	NBS	なし	25枚 / 包	100枚	1,036	103,600
3912	標準タイプ、フタなし	白	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	541	54,100
3915	標準タイプ、フタなし	黒	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	541	54,100
3916	標準タイプ、フタ付き	黒	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	844	84,400
3917	標準タイプ、フタ付き	白	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	844	84,400
3922	標準タイプ、フタなし	白	平底	高結合	なし	25枚 / 包	100枚	541	54,100
3925	標準タイプ、フタなし	黒	平底	高結合	なし	25枚 / 包	100枚	541	54,100
3990	標準タイプ、フタなし	白	平底	NBS	なし	5枚 / 包	25枚	1,084	27,100
3991	標準タイプ、フタなし	黒	平底	NBS	なし	5枚 / 包	25枚	1,084	27,100
3642	ハーフエリアプレート、フタなし	白	平底	NBS	なし	25枚 / 包	100枚	1,167	116,700
3686	ハーフエリアプレート、フタなし	黒	平底	NBS	なし	25枚 / 包	100枚	1,167	116,700
3688	ハーフエリアプレート、フタ付き	白	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	1,011	101,100
3693	ハーフエリアプレート、フタなし	白	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	649	64,900
3694	ハーフエリアプレート、フタなし	黒	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	649	64,900
3875	ハーフエリアプレート、フタ付き	黒	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	1,011	101,100
3992	ハーフエリアプレート、フタなし	白	平底	NBS	なし	5枚 / 包	25枚	1,164	29,100
3993	ハーフエリアプレート、フタなし	黒	平底	NBS	なし	5枚 / 包	25枚	1,228	30,700

## Corning® 96 ウェル クリアボトム ポリスチレン製マイクロプレート (黒、白)

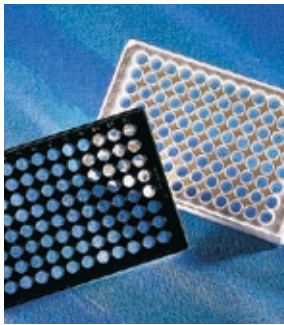

96ウェルクリアボトムマイクロプレート(黒、白)

蛍光アッセイでの光学的パフォーマンスを改善するためのヒント

Corning スペシャルオプティックス96ウェルマイクロプレートは、黒色壁と超薄い透明底を持つので、クリアな画像が撮ることができ、蛍光アッセイではバックグラウンドを抑えます。


- ▶ 底部が従来のプレートよりも60%薄いので、蛍光アッセイのバックグラウンドが抑えられ、340 nm までの測定が可能です。
- ▶ 壁面が不透明なのでウェル間のクロストークが抑えられます。
- ▶ 底部が透明な平底なので顕微鏡での直接観察が可能です。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
3340	標準タイプ、フタ付き	黒クリアボトム	平底	Corning CellBIND	済み	5枚 / 包	50枚	2,168	108,400
3601	標準タイプ、フタなし	黒クリアボトム	平底	高結合	なし	25枚 / 包	100枚	1,968	196,800
3603	標準タイプ、フタ付き	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	個別包装	48枚	1,971	94,600
3604	標準タイプ、フタなし	白クリアボトム	平底	NBS	なし	25枚 / 包	100枚	2,074	207,400
3610	標準タイプ、フタ付き	白クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	個別包装	48枚	1,971	94,600
3614	スペシャルオプティックスプレート、フタなし	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	25枚 / 包	100枚	1,881	188,100
3615	スペシャルオプティックスプレート、フタなし	黒クリアボトム	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	1,750	175,000
3631	標準タイプ、フタなし	黒クリアボトム	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	1,575	157,500
3632	標準タイプ、フタなし	白クリアボトム	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	1,575	157,500
3651	標準タイプ、フタなし	黒クリアボトム	平底	NBS	なし	25枚 / 包	100枚	2,074	207,400
3842	標準タイプ、フタ付き**	黒クリアボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み*	20枚 / 包	100枚	2,962	296,200
3843	標準タイプ、フタ付き**	白クリアボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み*	20枚 / 包	100枚	2,962	296,200
3903	標準タイプ、フタ付き	白クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	1,881	188,100
3904	標準タイプ、フタ付き	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	1,881	188,100
3995	標準タイプ、フタなし	白クリアボトム	平底	NBS	なし	5枚 / 包	25枚	2,176	54,400
3880	ハーフエリアプレート、フタなし	黒クリアボトム	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	1,685	168,500
3881	ハーフエリアプレート、フタなし	黒クリアボトム	平底	NBS	なし	25枚 / 包	100枚	2,179	217,900
3882	ハーフエリアプレート、フタ付き	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	1,985	198,500
3883	ハーフエリアプレート、フタなし	白クリアボトム	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	1,685	168,500
3884	ハーフエリアプレート、フタなし	白クリアボトム	平底	NBS	なし	25枚 / 包	100枚	2,179	217,900
3885	ハーフエリアプレート、フタ付き	白クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	1,985	198,500
3886	ハーフエリアプレート、フタなし	白クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	25枚 / 包	100枚	1,789	178,900
3887A	ハーフエリアプレート、フタなし	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	25枚 / 包	100枚	1,789	178,900
3994	ハーフエリアプレート、フタなし	白クリアボトム	平底	NBS	なし	5枚 / 包	25枚	2,292	57,300

\* 無菌的に製造しています。

\*\* 低蒸発構造のフタです。

## Falcon® 96 ウェル ポリスチレン製マイクロプレート

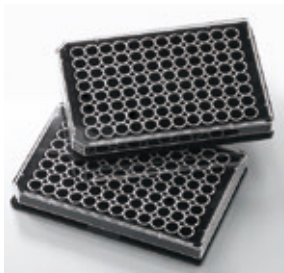

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
353072	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	個別包装	50枚	574	28,700
353075	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	5枚 / 包	50枚	542	27,100
353916	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	25枚 / 包	100枚	541	54,100
353376	標準タイプ、フタ付き	黒	平底	細胞培養表面処理	済み	8枚 / 包	32枚	741	23,700
353077	標準タイプ、フタ付き	透明	丸底	細胞培養表面処理	済み	個別包装	50枚	574	28,700
353296	標準タイプ、フタ付き	白	平底	細胞培養表面処理	済み	5枚 / 包	50枚	802	40,100
353377	標準タイプ、フタ付き	白クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	8枚 / 包	32枚	1,729	55,300
353219	標準タイプ、フタ付き	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	8枚 / 包	32枚	1,729	55,300
353936	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	14枚 / 包	84枚	548	46,000
353227	標準タイプ、フタ付き	透明	丸底	細胞培養表面処理	済み	5枚 / 包	50枚	574	28,700
353872	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	Corning プライマリア	済み	個別包装	50枚	836	41,800
351172	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	無処理	済み	個別包装	50枚	546	27,300
351177	標準タイプ、フタ付き	透明	丸底	無処理	済み	個別包装	50枚	546	27,300
353910	標準タイプ、フタなし	透明	丸底	無処理	なし	5枚 / 包	50枚	276	13,800


## Corning® BioCoat® 96 ウェルと Corning PureCoat™ 96 ウェルマイクロプレート

- ▶ Corning BioCoatは、細胞接着や増殖をサポートするための様々な表面処理を提供します。
- ▶ Corning PureCoat アミンは、表面がポジティブにチャージされており、血清、無血清、血清の量を減らした培養条件下における初代細胞、トランスフェクト細胞、形質転換細胞や扱いの難しい細胞の接着を改善します。
- ▶ 高度に制御された無菌製造環境下でコートしており、ロット間の一貫性、アッセイの再現性、コンタミネーションのコントロールをしています。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
354407	BioCoat、フタ付き	透明	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	5枚	1,500	7,500
356407	BioCoat、フタ付き	透明	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	50枚	1,220	61,000
356698	BioCoat、フタ付き	透明	平底	コラーゲンI	済み	20枚/包	80枚	1,219	97,500
354429	BioCoat、フタ付き	透明	平底	コラーゲンIV	済み	個別包装	5枚	3,200	16,000
354461	BioCoat、フタ付き	透明	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	5枚	1,500	7,500
356461	BioCoat、フタ付き	透明	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	50枚	1,220	61,000
356690*	BioCoat、フタ付き	透明	平底	ポリ-D-リジン	済み	20枚/包	80枚	1,190	95,200
354409	BioCoat、フタ付き	透明	平底	フィブロネクチン	済み	個別包装	5枚	3,420	17,100
354689	BioCoat、フタ付き	透明	平底	ゼラチン	済み	5枚/包	5枚	2,180	10,900
356689	BioCoat、フタ付き	透明	平底	ゼラチン	済み	5枚/包	50枚	1,670	83,500
354410	BioCoat、フタ付き	透明	平底	ラミニン	済み	個別包装	5枚	3,840	19,200
354596	BioCoat、フタ付き	透明	平底	ラミニン/ ポリ-D-リジン	済み	個別包装	5枚	4,240	21,200
354657	BioCoat、フタ付き	透明	平底	ラミニン/ ポリ-L-オルニチン	済み	個別包装	5枚	4,240	21,200
354516	BioCoat、フタ付き	透明	平底	ポリ-L-リジン	済み	5枚/包	5枚	1,500	7,500
356516	BioCoat、フタ付き	透明	平底	ポリ-L-リジン	済み	5枚/包	50枚	1,220	61,000
354607	BioCoat、フタ付き	透明	平底	Corning マトリゲル マトリックス薄層	済み	5枚/包	5枚	5,160	25,800
354519	BioCoat、フタ付き	白	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	5枚	1,620	8,100
356519	BioCoat、フタ付き	白	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	50枚	1,348	67,400
356699	BioCoat、フタ付き	白	平底	コラーゲンI	済み	20枚/包	80枚	1,285	102,800
354620	BioCoat、フタ付き	白	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	5枚	1,620	8,100
356620	BioCoat、フタ付き	白	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	50枚	1,348	67,400
356691*	BioCoat、フタ付き	白	平底	ポリ-D-リジン	済み	20枚/包	80枚	1,285	102,800
354650	BioCoat、フタ付き	白クリア ボトム	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	5枚	2,560	12,800
356650	BioCoat、フタ付き	白クリア ボトム	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	50枚	2,056	102,800
356701*	BioCoat、フタ付き	白クリア ボトム	平底	コラーゲンI	済み	20枚/包	80枚	1,987	158,900
354651	BioCoat、フタ付き	白クリア ボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	5枚	2,560	12,800
356651	BioCoat、フタ付き	白クリア ボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	50枚	2,056	102,800
356693*	BioCoat、フタ付き	白クリア ボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み	20枚/包	80枚	1,987	158,900
354649	BioCoat、フタ付き	黒クリア ボトム	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	5枚	2,560	12,800
356649	BioCoat、フタ付き	黒クリア ボトム	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	50枚	2,056	102,800
356700	BioCoat、フタ付き	黒クリア ボトム	平底	コラーゲンI	済み	20枚/包	80枚	1,987	158,900
354640	BioCoat、フタ付き	黒クリア ボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	5枚	2,560	12,800
356640	BioCoat、フタ付き	黒クリア ボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	50枚	2,056	102,800
356692	BioCoat、フタ付き	黒クリア ボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み	20枚/包	80枚	1,987	158,900
354717	PureCoat、 フタ付き	黒クリア ボトム	平底	アミン	済み	5枚/包	5枚	2,260	11,300
356717	PureCoat、 フタ付き	黒クリア ボトム	平底	アミン	済み	5枚/包	50枚	2,112	105,600

\*受発注品です。ご注文いただいたからお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。

## Corning® マルチコートマイクロプレート

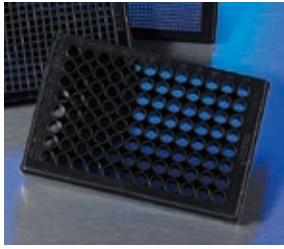

- ▶ Corning 96ウェル マルチコートマイクロプレートは、1枚のプレートで6種類の異なる表面処理を試すことができます。
- ▶ このマイクロプレートは、アッセイにおいて最適な表面処理を決定するのに大変有用で、本プレートの結果に基づいて、スクリーニングや実験を単一の表面処理で行う事ができます。
- ▶ コーティングはポリ-D-リジン、コラーゲンI、ゼラチン、ラミニン、フィブロネクチン、そして細胞培養表面処理です。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
3823*	クリアボトムプレート フタ付き	黒	平底	6種類	済み**	10枚/包	10枚	10,570	105,700

\*受発注品です。ご注文いただいてからお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。

\*\*無菌的に製造しています。

## Corning 96 ウェル スフェロイドプレート




新しい独自デザインの透明丸底と黒いウェル壁面のマイクロプレートは、1枚のプレート内で三次元多細胞性スフェロイドの作成と解析を行うのに理想的です。超低接着表面が均一で再現性のある三次元多細胞性スフェロイド形成を可能にしました。透明丸底の底位置まで達する長めの黒色ウェル壁によりウェル間のクロストークを抑えます。

- ▶ 黒いマイクロプレートボディと透明な丸底です。
- ▶ 共有結合している超低接着表面がウェル表面への細胞吸着を抑えます。
- ▶ 新しいウェルの設計が、ウェル間で均一なシングルスフェロイドの形成を助け、自動イメージングを可能にします。
- ▶ 各ウェルをシールドするユニークなデザインでウェル間のクロストークを最小にします。
- ▶ 培養したスフェロイドを新しいプレートに移す必要なく、同じマイクロプレートのままでアッセイできます。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
4515	スフェロイドプレート	黒クリアボトム	丸底	超低接着	済み	個別包装	5枚	3,040	15,200
4520	スフェロイドプレート	黒クリアボトム	丸底	超低接着	済み	10枚/包	50枚	2,910	145,500

## Corning 96 ウェル マトリゲル基底膜マトリックス 3D プレート

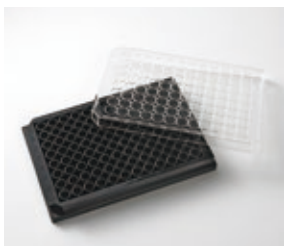


コート済みですぐに使用できます。マトリゲル基底膜マトリックスが96ウェルのハイスルーブットフォーマットの各ウェルに分注されており、3D細胞培養に最適です。3D細胞培養の「オントップ / サンドイッチ法」、「包埋法」いずれでも使用できます。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
356259*	BioCoat、フタ付き	黒クリアボトム	平底	Corning マトリゲルマトリックス	済み	個別包装	1	29,800	29,800

\*受発注品です。ご注文いただいてからお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。

## Corning® 96 ウェル ハイコンテンツスクリーニング用マイクロプレート、フィルムボトム

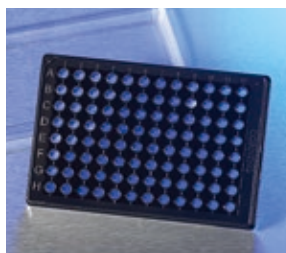


厚み127 μm の非常に透明度の高いフィルムは、プレート全体とウェル内の平滑性にすぐれ、高解像度細胞イメージングに理想的です。マイクロプレートとフィルムはサイクリックオレフィンコポリマー (COC) を使用しており、優れた光学特性、薬品耐性、力学的な安定性をもちます。

- ▶ COC 製なので、幅広い種類の薬品(DMSOを含む)に耐性があり、丈夫です。
- ▶ 非常に透明度の高いフィルムは顕微鏡イメージングに適しています。
- ▶ ウェル間とウェル内のフィルムボトムの平滑性はそれぞれ50 μmおよび10 μm以内と、ハイコンテンツスクリーニングに最適化されています。
- ▶ 自家蛍光と複屈折が低く保たれています。
- ▶ フィルムの厚さ127 μm(スタンダードベース)、または厚さ190 μm(ローベース)から選択できます。
- ▶ ローベースマイクロプレートは、高開口対物レンズを使用してもすべてのウェルが遮られることなく読み取り可能です。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
4680	ハーフエリアプレート フタ付き	黒クリア ボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	4枚 / 包	16枚	2,357	37,700
4517	ローベース ハーフエリアプレート フタ付き	黒クリア ボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	20枚	2,585	51,700

## Corning 96 ウェル ハイコンテンツスクリーニング用マイクロプレート、ガラスボトム

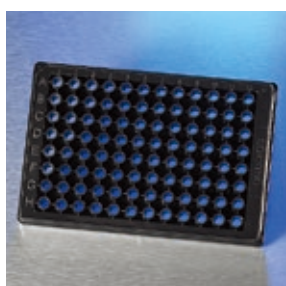

細胞イメージ解析装置を用いたハイコンテンツセルベースアッセイに最適なガラスボトムプレートです。平滑で透明度の高いガラスにより、オートフォーカスの時間を短縮し、スループットを高めめます。

- ▶ 光学品質の傷が付きにくいガラスを使用しています。
- ▶ イメージング顕微鏡に適合した厚さ200 μmのガラスボトムです。
- ▶ ウェルボトムの平滑性は50 μm以下で細胞イメージ解析装置に適しています。
- ▶ バックグラウンド蛍光が低く、クロストークが少ないため、セルベースアッセイに最適です。
- ▶ 96ウェルハーフエリアプレートは試薬の消費を少なく抑えることができるため、コストダウンを図れます。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
4580	ガラスボトムプレート フタ付き	黒クリアボトム	平底	無処理	済み	個別包装	10枚	2,590	25,900
4582	ガラスボトムプレート フタ付き	黒クリアボトム	平底	コラーゲンI	済み*	個別包装	10枚	5,820	58,200
4584	ガラスボトムプレート フタ付き	黒クリアボトム	平底	フィブロネクチン	済み*	個別包装	10枚	6,980	69,800
4586	ガラスボトムプレート フタ付き	黒クリアボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み*	個別包装	10枚	5,820	58,200

\*無菌的に製造しています。



96ウェルUVマイクロプレート

### Corning® 96 ウェル UV マイクロプレート

コーニング96ウェルUVマイクロプレートのウェル底部はUV光を透過させるので、タンパク質および核酸の濃度測定に最適です。

- ▶ RNase/DNaseフリーです。
- ▶ UV透過性の底部は直接成型されたアクリルベースなので、強度に優れ、液漏れが非常に起こりにくい構造です。
- ▶ 平底1ウェル当たりの最大容量は360  $\mu\text{L}$ 、ワーキングボリュームは75~200  $\mu\text{L}$ です。
- ▶ ハーフエリアのUVマイクロプレートのウェル容量は205  $\mu\text{L}$ 、ワーキングボリュームは25~125  $\mu\text{L}$ です。
- ▶ 低いバックグラウンドでのUV吸収測定が可能です(特に260~280 nm)。
- ▶ フタは別売りです(フタやその他のマイクロプレート用アクセサリに関する情報は42~43ページに掲載しております)。


カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格 (円)	
							単価	ケース価格
3635	標準タイプ、フタなし	透明	平底	なし	25枚/包	50枚	2,114	105,700
3679	ハーフエリアプレート、フタなし	透明	平底	なし	25枚/包	50枚	2,222	111,100

### Corning 96 ウェル ポリ塩化ビニル (PVC) 製マイクロプレート (透明)

- ▶ 無処理PVC製マイクロプレートは経済的なプレートで、溶液でのアッセイ、段階希釈、一般的な保存の用途にご使用いただけます。
- ▶ 1ウェル当たりの最大容量が250  $\mu\text{L}$ 、ワーキングボリュームは50~150  $\mu\text{L}$ です。
- ▶ 専用のフタはございません。ユニバーサルリッド(カタログ番号 3098、3099)が対応します。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格 (円)	
							単価	ケース価格
2797	標準タイプ、フタなし	透明	丸底	なし	25枚/包	100枚	302	30,200

## Corning® 96 ウェル ストリップウェル ポリスチレン製マイクロプレート

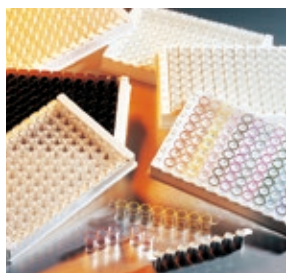

ストリップウェルマイクロプレート



標準タイプとローボリュームタイプ

### ローボリュームストリップウェルマイクロプレート

コストを大幅に削減できます!

- ▶ 抗体コストを70%以上節約できます。
- ▶ 試薬コストを50%以上節約できます。

#### 特長

- ▶ 1ウェル当たりの最大容量は190 μLです。
- ▶ ワーキングボリュームは75~125 μLです。
- ▶ 高さ、光路長の長さは標準タイプのストリップと同じです。
- ▶ ウェル中心の位置が標準タイプの96ウェルプレートと同じです。

### カスタムカラー



Corning ストリップウェルプレートは *in vitro* での診断アッセイ用にご使用いただけます。平底型ストリップは切り離しが簡単で格子状のストリップホルダーにあらかじめセットされており、これを切り離すと各ウェルごとにプレートにセットすることができます。

- ▶ ストリップウェルプレートは96ウェル平底フォーマットです。
- ▶ ローボリュームタイプと標準タイプのストリップウェルマイクロプレートのウェル容量はそれぞれ190 μL、360 μLです。
- ▶ 8ウェルチューブストリップはストリップホルダーに1方向からしかセットできないようにデザインされており、ストリップの向きを間違えることはありません。
- ▶ アクセサリーは42ページに掲載しております。

カタログ番号	色	表面処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格 (円)	
					単価	ケース価格
<b>ローボリュームストリップウェルマイクロプレート</b>						
2481	透明	高結合	25枚 / 包	100枚	1,556	155,600
2482	黒	なし	25枚 / 包	100枚	1,881	188,100
2483*	黒	高結合	25枚 / 包	100枚	1,881	188,100
2484*	白	なし	25枚 / 包	100枚	1,881	188,100
2485	白	高結合	25枚 / 包	100枚	1,881	188,100

### 標準タイプストリップウェルマイクロプレート

92592	透明	高結合	25枚 / 包	100枚	933	93,300
2593	透明	なし	25枚 / 包	100枚	933	93,300
2580*	透明	高結合	200本 / 包	800本	72	57,400
9102**	透明	細胞培養表面処理、滅菌済み	個別包装	50枚	1,202	60,100
3913	白	なし	25枚 / 包	100枚	973	97,300
3923	白	高結合	25枚 / 包	100枚	973	97,300
3914	黒	なし	25枚 / 包	100枚	973	97,300
3924	黒	高結合	25枚 / 包	100枚	973	97,300
42592***	透明	高結合	25枚 / 包	100枚	933	93,300
43923***	白	高結合	25枚 / 包	100枚	973	97,300

\* 各8ウェルストリップには格子状ストリップホルダーがなく、バルク包装されています。

\*\* マイクロプレートはフタと一緒に個別包装されています。

\*\*\* カタログ番号42592とカタログ番号43923はカタログ番号92592、カタログ番号3923よりストリップが固くセットされています。また43923は最少注文数量50ケースの受注発注品です。

\* 最少注文数量10ケースの受注発注品です。

### ストリップ用アクセサリ

カタログ番号	仕様	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格 (円)	
					単価	ケース価格
2572	格子状ストリップホルダー	なし	5枚 / 包	20枚	650	13,000
2578	96ウェルストリップエジェクター	なし	5枚 / 包	5枚	2,600	13,000

### カラーコード

コーニングではストリップウェルマイクロプレートをカラーコードできるようにして提供しています。現在14色を提供しており、高結合、無処理のストリップウェルプレートからお選びいただけます。色の指定は透明ともう1色ご選択いただけます。カラーコード用ストリップウェルマイクロプレートはオーダーメイドで、最小発注量が設定されておりますのでコーニングまでご連絡ください。

## Corning® 96 ウェル ポリプロピレン製ストレージマイクロプレートとストレージブロック


Corning ポリプロピレン製マイクロプレートには、アッセイや保存時の必要に応じて小容量や大容量（ブロック）ウェルの形状のものがあります。

- ▶ 平底、丸底、V型のウェル形状があります。
- ▶ スカートの高さが統一されており、ロボット操作で保持しやすいデザインとなっています。
- ▶ 溶媒に対して耐性があるポリプロピレン製です。一般的な有機溶媒に対しても耐性があります。（DMSO、エタノール、メタノールなど）
- ▶ RNase/DNaseフリーです。
- ▶ 滅菌済みと未滅菌の両方がございます。
- ▶ シーリングテープやマットなどのマイクロプレート用アクセサリ製品の情報については、マイクロプレート用アクセサリの項(42ページ)をご参照ください。

### 96 ウェルポリプロピレン製マイクロプレートの規格とウェル容量

ウェル形状	1ウェル当たりの最大容量 (μL)	ウェルの深さ (mm)	ウェルの直径 (mm)	プレートのサイズ (横×縦×高さ) (mm)
96ウェル平底	360	10.67	6.86	127.76×85.48×14.22
96ウェル丸底	330	11.3	6.86	127.76×85.48×14.22
96ウェルV底	320	11.13	6.86	127.76×85.48×14.22
96ウェルV底、容量拡大型	450	12.43	8.5	127.76×85.48×14.35
96ウェル0.5 mL ブロック	500	25.3	6.86	127.76×85.48×27.18
96ウェル1 mL ブロック	1,000	39.9	6.86	127.76×85.09×41.66
96ウェル2 mL ブロック	2,000	42.04	8.13 (幅)	128.27×85.85×43.94

### 96 ウェルポリプロピレン製マイクロプレート

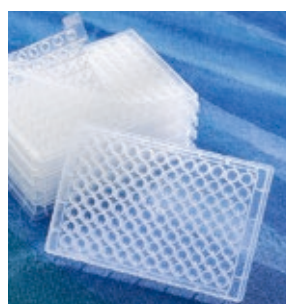

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格 (円) 単価	ケース価格
3355	標準タイプ、フタなし	白	丸底	なし	25枚 / 包	100枚	546	54,600
3356	標準タイプ、フタなし	黒	丸底	なし	25枚 / 包	100枚	546	54,600
3359	標準タイプ、フタなし	透明	丸底	済み	25枚 / 包	100枚	464	46,400
3879	標準タイプ、フタ付き	透明	丸底	済み	個別包装	50枚	662	33,100
3365	標準タイプ、フタなし	透明	丸底	なし	25枚 / 包	100枚	424	42,400
3364	標準タイプ、フタなし	透明	平底	なし	25枚 / 包	100枚	424	42,400
3343	容量拡大型プレート、フタなし	透明	V底	なし	10枚 / 包	50枚	532	26,600
3344	容量拡大型プレート、フタなし	透明	V底	済み	10枚 / 包	50枚	598	29,900
3357	標準タイプ、フタなし	透明	V底	済み	25枚 / 包	100枚	464	46,400
3363	標準タイプ、フタなし	透明	V底	なし	25枚 / 包	100枚	424	42,400

### 96 ウェルポリプロピレン製ストレージブロック



カタログ番号	プレートのフォーマット	ウェル容量 (mL)	色	ウェル底部の形状	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格 (円) 単価	ケース価格
3957	0.5 mL丸型ウェルブロック	0.5	透明	V底	なし	10枚 / 包	100枚	639	63,900
3959	1 mL丸型ウェルブロック	1	透明	丸底	なし	5枚 / 包	100枚	835	83,500
3956	0.5 mL丸型ウェルブロック	0.5	透明	V底	済み	10枚 / 包	50枚	642	32,100
3958	1 mL丸型ウェルブロック	1	透明	丸底	済み	5枚 / 包	25枚	832	20,800
3960	2 mL角型ウェルブロック	2	透明	V底	済み	5枚 / 包	25枚	1,256	31,400
3961	2 mL角型ウェルブロック	2	透明	V底	なし	5枚 / 包	100枚	1,248	124,800


96ウェルポリプロピレン製ストレージブロック、ストレージマット

### Falcon® 96 ウェル ポリプロピレン製ストレージプレート

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格 (円) 単価	ケース価格
351190	標準タイプ、フタなし	透明	丸底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	408	40,800
353263	標準タイプ、フタなし	透明	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	507	50,700



## Corning® と Falcon® 384 ウェル マイクロプレート

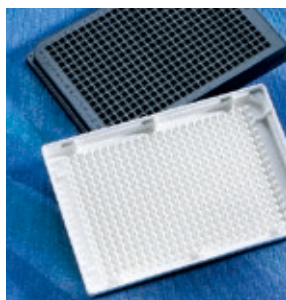

### ローボリューム384ウェル ソリッド丸底マイクロプレート

アッセイに最適な独自のウェルデザインとなっています。

- ▶ ウェルの底部が高くなっているため検出感度が上がります。
- ▶ リムが高くなっており、毛細管現象によるコンタミネーションを防ぎます。
- ▶ 丸底ではZファクターが改善され、気泡が入りにくくなります。
- ▶ 効率を上げるため円錐型に成型されています。

コーニングではハイスループットアッセイと保存に適した様々な384ウェルマイクロプレートを提供しています。マイクロプレートは用途により以下のように分類されます。

- ▶ 384ウェルアッセイ用マイクロプレート
  - ジェネラルアッセイ用—無処理、NBS、高結合、UVマイクロプレート
  - セルベースアッセイ用—細胞培養表面処理、Corning CellBIND® 表面処理、Corning BioCoat®、Corning PureCoat™、超低接着表面マイクロプレート
- ▶ 384ウェルポリプロピレン製ストレージマイクロプレート

このセクションガイドにはPCR用とジェノミクス関連製品は含まれておりません。これらの製品の詳細情報については、弊社までお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイト ([www.corning.com/jp/lifesciences](http://www.corning.com/jp/lifesciences)) をご覧ください。

マイクロプレートに関するその他の情報については、当ガイドのはじめにあるマイクロプレートの選択手順でご確認ください。

コーニングでは様々なアッセイマイクロプレートを提供しています。コーニングのアッセイマイクロプレートは4種類に分類されます。

- ▶ 384ウェルポリスチレン製マイクロプレート(透明)
- ▶ 384ウェルポリスチレン製ソリッドマイクロプレート(黒、白)
- ▶ 384ウェルポリスチレン製クリアボトムマイクロプレート(黒、白)
- ▶ 384ウェルUVマイクロプレート

少ない液量で行うアッセイ用に、ソリッドローボリューム丸底タイプと黒色クリアボトムタイプのコーニング384ウェルポリスチレン製ローボリュームプレートを販売しています。

384ウェルプレート	ウェル底部の形状	1ウェル当たりの最大容量 (μL)	ワーキングボリューム (μL)
標準タイプ	平底	112	20 ~ 80
ローボリューム、ソリッド	丸底	35	5 ~ 20
ローボリューム、クリアボトム	平底	50	5 ~ 40


- ▶ Corning ポリスチレン製384ウェルプレートの寸法は127.76 × 85.48 × 14.22 mm (横 × 縦 × 高さ)で、業界の推奨規格に適合しています。



### 384ウェルの形状と規格

コーニングの細胞培養用384ウェルマイクロプレートには、細胞培養表面処理、Corning CellBIND 表面、ポリ-D-リジンコート、コラーゲンコートマイクロプレートがあります。細胞培養表面処理マイクロプレートには、他の培養容器と同様の表面処理が施されています。また、ポリ-D-リジン処理は接着系細胞の接着を向上させます。Corning CellBIND 表面は細胞接着がより均一でむらがありません。

## Corning® 384 ウェル ポリスチレン製マイクロプレート (透明)

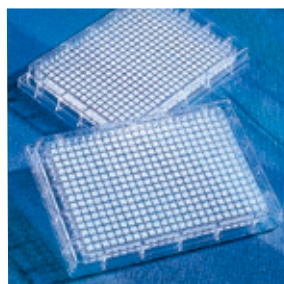

- ▶ 1ウェル当たりの最大容量が112 μL、ワーキングボリュームは20~80 μLです。
- ▶ 細胞培養用プレートは滅菌済みで、ノンパイロジェニックです。
- ▶ 384ウェルユニバーサルオプティックスNBSプレートは改良型ポリマーを用いて製造されており、透明度が高く耐薬品性が向上しています。
- ▶ カタログ番号末尾にBC表記されている製品は、あらかじめプレート側面の4辺にバーコードがついています。
- ▶ フタ付きのプレートもあります。(フタやその他のマイクロプレート用アクセサリに関する情報は42ページに掲載しております)。


カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格 (円) 単価	ケース価格
3640	標準タイプ、フタなし	透明	平底	NBS	なし	25枚 / 包	100枚	1,298	129,800
3844	標準プレート、フタ付き	透明	平底	ポリ-D-リジン	済み*	20枚 / 包	100枚	3,594	359,400
3680	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	無処理	済み	20枚 / 包	100枚	865	86,500
3700	標準タイプ、フタなし	透明	平底	高結合	なし	25枚 / 包	100枚	741	74,100
3701	標準プレート、フタ付き	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	1,050	105,000
3702	標準タイプ、フタなし	透明	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	741	74,100
3702BC	標準タイプ、フタなし、バーコード付き	透明	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	815	81,500

\* 無菌的に製造しています。



## Corning 384 ウェル ポリスチレン製ソリッドマイクロプレート (黒、白)



蛍光および発光アッセイ時にウェル間のクロストークを抑えるデザインです。

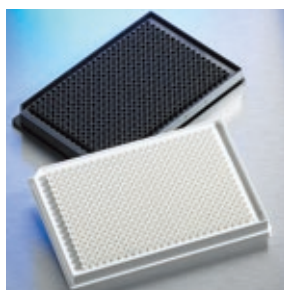

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格 (円) 単価	ケース価格
3570	ソリッドプレート、ローフランジ、フタ付き	白	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚 / 包	50枚	1,088	54,400
3571	ソリッドプレート、ローフランジ、フタ付き	黒	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚 / 包	50枚	1,088	54,400
3572	標準タイプ、ローフランジ、フタなし	白	平底	無処理	なし	10枚 / 包	50枚	866	43,300
3573	標準タイプ、ローフランジ、フタなし	黒	平底	無処理	なし	10枚 / 包	50枚	866	43,300
3574	標準タイプ、ローフランジ、フタなし	白	平底	NBS	なし	10枚 / 包	50枚	1,358	67,900
3574BC	標準タイプ、ローフランジ、フタなし、バーコード付き	白	平底	NBS	なし	10枚 / 包	50枚	1,496	74,800
3575	標準タイプ、ローフランジ、フタなし	黒	平底	NBS	なし	10枚 / 包	50枚	1,358	67,900
3575BC	標準タイプ、ローフランジ、フタなし、バーコード付き	黒	平底	NBS	なし	10枚 / 包	50枚	1,496	74,800
3576	標準タイプ、ローフランジ、フタなし	白	平底	高結合	なし	10枚 / 包	50枚	954	47,700
3577	標準タイプ、ローフランジ、フタなし	黒	平底	高結合	なし	10枚 / 包	50枚	954	47,700
3820	ローボリュームプレート、フタなし	黒	平底	NBS	なし	10枚 / 包	50枚	1,726	86,300
3821	ローボリュームプレート、フタなし	黒	平底	無処理	なし	10枚 / 包	50枚	1,234	61,700
3821BC	ローボリュームプレート、フタなし、バーコード付き	黒	平底	無処理	なし	10枚 / 包	50枚	1,358	67,900
3822	ローボリュームプレート、フタ付き	黒	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚 / 包	50枚	1,482	74,100
3824	ローボリュームプレート、フタなし	白	平底	NBS	なし	10枚 / 包	50枚	1,726	86,300
3824BC	ローボリュームプレート、フタなし、バーコード付き	白	平底	NBS	なし	10枚 / 包	50枚	1,900	95,000
3825	ローボリュームプレート、フタなし	白	平底	無処理	なし	10枚 / 包	50枚	1,234	61,700
3826	ローボリュームプレート、フタ付き	白	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚 / 包	50枚	1,482	74,100
4510	ローボリュームプレート、フタなし	黒	丸底	高結合	なし	10枚 / 包	50枚	958	47,900
4511	ローボリュームプレート、フタなし	黒	丸底	無処理	なし	10枚 / 包	50枚	958	47,900
4512	ローボリュームプレート、フタなし	白	丸底	無処理	なし	10枚 / 包	50枚	958	47,900
4513	ローボリュームプレート、フタなし	白	丸底	NBS	なし	10枚 / 包	50枚	1,464	73,200
4514	ローボリュームプレート、フタなし	黒	丸底	NBS	なし	10枚 / 包	50枚	1,464	73,200

## Corning® 384 ウェル クリアボトム ポリスチレン製マイクロプレート (黒、白)

トップまたはボトムで検出するプレートリーダーを使用する蛍光アッセイ、発光アッセイに適しています。

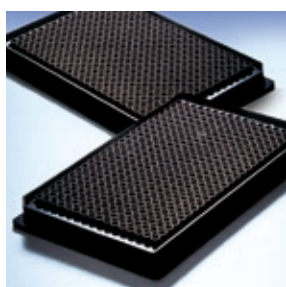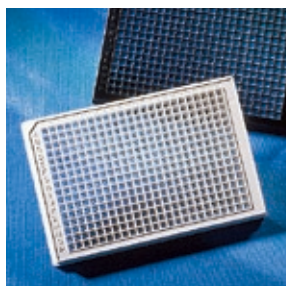

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格 (円) 単価	ケース価格
3540	ローボリューム、フタなし	黒クリアボトム	平底	無処理	なし	10枚 / 包	50枚	1,482	74,100
3542	ローボリューム、フタ付き	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚 / 包	50枚	1,852	92,600
3544	ローボリューム、フタなし	黒クリアボトム	平底	NBS	なし	10枚 / 包	50枚	2,100	105,000
3643	ローボリューム、フタ付き	黒クリアボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み*	10枚 / 包	50枚	4,320	216,000
3767	ローフランジ、フタなし	白クリアボトム	平底	NBS	なし	25枚 / 包	100枚	2,542	254,200
3766	ローフランジ、フタなし	黒クリアボトム	平底	NBS	なし	25枚 / 包	100枚	2,542	254,200
3770	ローフランジ、フタ付き	黒クリアボトム	平底	Corning CellBIND	済み	20枚 / 包	100枚	2,469	246,900
3770BC	ローフランジ、フタ付き、バーコード付き	黒クリアボトム	平底	Corning CellBIND	済み	20枚 / 包	100枚	2,704	270,400
3763	ローフランジ、フタなし	白クリアボトム	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	2,098	209,800
3765	ローフランジ、フタ付き	白クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	2,353	235,300
3762	ローフランジ、フタなし	黒クリアボトム	平底	無処理	なし	25枚 / 包	100枚	2,098	209,800
3764	ローフランジ、フタ付き	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	2,353	235,300
3764BC	ローフランジ、フタ付き、バーコード付き	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	2,469	246,900
4588	ローフランジ、フタ付き	黒クリアボトム	平底	超低接着表面	済み	20枚 / 包	100枚	2,222	222,200
3768	ローフランジ、フタ付き	黒クリアボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み*	20枚 / 包	100枚	4,196	419,600
3769	ローフランジ、フタ付き	白クリアボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み*	20枚 / 包	100枚	4,196	419,600
4690**	ローフランジ、フタ付き	黒クリアボトム	平底	コラーゲンI	済み*	20枚 / 包	100枚	4,196	419,600
4596**	ローフランジ、フタ付き	黒クリアボトム	平底	フィブロネクチン	済み*	20枚 / 包	100枚	5,372	537,200
3985	オプティカルイメージングプレート、フタ付き	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	2,542	254,200
3985BC	オプティカルイメージングプレート、フタ付き、バーコード付き	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	100枚	2,802	280,200

\* 無菌的に製造しています。


\*\*受注発注品です。ご注文いただいたからお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。

## Falcon® 384 ウェル マイクロプレート

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格 (円) 単価	ケース価格
353961	標準タイプ、フタ付き	透明	平底	細胞培養表面処理	済み	5枚 / 包	50枚	1,176	58,800
353988	標準タイプ、フタ付き	白	平底	細胞培養表面処理	済み	5枚 / 包	50枚	1,210	60,500
353963*	標準タイプ、フタ付き	白クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	5枚 / 包	50枚	2,272	113,600
353962	標準タイプ、フタ付き	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	5枚 / 包	50枚	2,272	113,600

\*受注発注品です。ご注文いただいたからお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。

## Corning® BioCoat® と Corning PureCoat™ 384 ウェルマイクロプレート

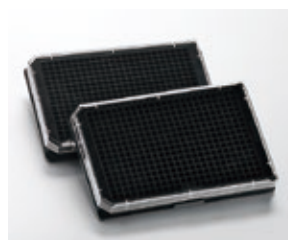

- ▶ Corning BioCoatは、細胞接着や増殖をサポートするための様々な表面処理を提供します。
- ▶ Corning PureCoat アミンは、表面がポジティブにチャージされており、血清、無血清、血清の量を減らした培養条件下における初代細胞、トランスフェクト細胞、形質転換細胞や扱いの難しい細胞の接着を改善します。
- ▶ 高度に制御された無菌製造環境下でコートしており、ロット間の一貫性、アッセイの再現性、コンタミネーションのコントロールをしております。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円)単価	ケース価格
354666*	BioCoat、フタ付き	透明	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	5枚	2,280	11,400
356666	BioCoat、フタ付き	透明	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	50枚	1,898	94,900
354662	BioCoat、フタ付き	透明	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	5枚	2,280	11,400
356662	BioCoat、フタ付き	透明	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	50枚	1,898	94,900
354665	BioCoat、フタ付き	白	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	5枚	2,280	11,400
356665	BioCoat、フタ付き	白	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	50枚	1,898	94,900
356703	BioCoat、フタ付き	白	平底	コラーゲンI	済み	20枚/包	80枚	1,865	149,200
354661	BioCoat、フタ付き	白	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	5枚	2,280	11,400
356661	BioCoat、フタ付き	白	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	50枚	1,898	94,900
354664	BioCoat、フタ付き	白ウェル/透明ボトム	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	5枚	3,660	18,300
356664*	BioCoat、フタ付き	白ウェル/透明ボトム	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	50枚	3,008	150,400
356702*	BioCoat、フタ付き	白ウェル/透明ボトム	平底	コラーゲンI	済み	20枚/包	80枚	2,949	235,900
354660	BioCoat、フタ付き	白ウェル/透明ボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	5枚	3,660	18,300
356660	BioCoat、フタ付き	白ウェル/透明ボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	50枚	3,008	150,400
354667	BioCoat、フタ付き	黒ウェル/透明ボトム	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	5枚	3,660	18,300
356667	BioCoat、フタ付き	黒ウェル/透明ボトム	平底	コラーゲンI	済み	5枚/包	50枚	3,008	150,400
356705	BioCoat、フタ付き	黒ウェル/透明ボトム	平底	コラーゲンI	済み	20枚/包	80枚	2,949	235,900
354663	BioCoat、フタ付き	黒ウェル/透明ボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	5枚	3,660	18,300
356663	BioCoat、フタ付き	黒ウェル/透明ボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み	5枚/包	50枚	3,008	150,400
356697	BioCoat、フタ付き	黒ウェル/透明ボトム	平底	ポリ-D-リジン	済み	20枚/包	80枚	2,949	235,900
354719*	PureCoat、フタ付き	黒ウェル/透明ボトム	平底	アミン	済み	5枚/包	5枚	3,100	15,500
356719	PureCoat、フタ付き	黒ウェル/透明ボトム	平底	アミン	済み	5枚/包	50枚	2,938	146,900

\*受注発注品です。ご注文いただいた日からお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。

## Corning マルチコートマイクロプレート




- ▶ Corning 384ウェルマルチコートマイクロプレートは、1枚のプレートで6種類の異なる表面処理を試すことができます。
- ▶ このマイクロプレートは、アッセイにおいて最適な表面処理を決定するのに大変有用で、本プレートの結果に基づいて、スクリーニングや実験を単一の表面処理で行う事ができます。
- ▶ コーティングはポリ-D-リジン、コラーゲンI、ゼラチン、ラミニン、フィブロネクチン、そして細胞培養表面処理です。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円)単価	ケース価格
4589*	クリアボトムプレート、ローフランジ、フタ付き	黒クリアボトム	平底	6種類	済み**	個別包装	10枚	15,280	152,800

\*受注発注品です。ご注文いただいた日からお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。

\*\*無菌的に製造しています。

## Corning® 384 ウェル スフェロイドプレート

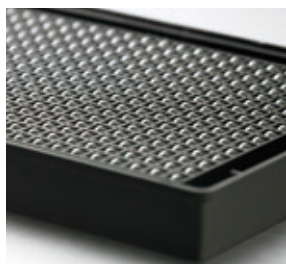


新しい独自デザインの透明丸底と黒いウェル壁面のマイクロプレートは、1枚のプレート内で三次元多細胞性スフェロイドの作製と解析を行うのに理想的です。超低接着表面が均一で再現性のある三次元多細胞性スフェロイド形成を可能にしました。透明丸底の底位置まで達する長めの黒色ウェル壁によりウェル間のクロストークを抑えます。

- ▶ 黒いマイクロプレートボディと透明な丸底です。
- ▶ 共有結合している超低接着表面がウェル表面への細胞吸着を抑えます。
- ▶ 新しいウェルの設計が、ウェル間で均一なシングルスフェロイドの形成を助け、自動イメージングを可能にします。
- ▶ 各ウェルをシールドするユニークなデザインでウェル間のクロストークを最小にします。
- ▶ 培養したスフェロイドを新しプレートに移す必要なく、同じマイクロプレートのままでアッセイできます。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
4516	スフェロイドプレート	黒クリア	丸底	超低接着	済み	個別包装	5枚	3,260	16,300
3830	スフェロイドプレート	黒クリア	丸底	超低接着	済み	10枚 / 包	50枚	3,142	157,100

## Corning 384 ウェル マトリゲル基底膜マトリックス 3D プレート

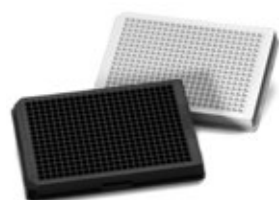


コート済みですぐに使用できます。マトリゲル基底膜マトリックスが384ウェルのハイスルーブットフォーマットの各ウェルに分注されており、3D細胞培養に最適です。3D細胞培養の「オントップ / サンドイッチ法」、「包埋法」いずれでも使用できます。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
356256*	BioCoat®, フタ付き	黒クリアボトム	平底	Corning マトリゲルマトリックス	済み	個別包装	5	28,660	143,300
356258*	BioCoat, フタ付き	白クリアボトム	平底	Corning マトリゲルマトリックス	済み	個別包装	1	29,800	29,800
356257*	BioCoat, フタ付き	白クリアボトム	平底	Corning マトリゲルマトリックス	済み	個別包装	5	28,660	143,300

\*受注発注品です。ご注文いただいた日からお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。

## Corning 384 ウェル ハイコンテンツスクリーニング用マイクロプレート、フィルムボトム

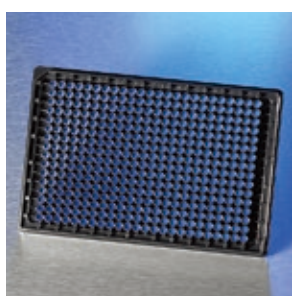


非常に透明度の高いフィルムは、プレート全体とウェル内の平滑性にすぐれ、高解像度細胞イメージングに理想的です。マイクロプレートとフィルムはサイクリックオレフィンコポリマー (COC) を使用しており、優れた光学特性、薬品耐性、力学的な安定性を持ちます。

- ▶ COC製なので、幅広い種類の薬品(DMSOを含む)に耐性があり、丈夫です。
- ▶ 非常に透明度の高いフィルムは顕微鏡イメージングに適しています。
- ▶ ウェル間とウェル内のフィルムボトムの平滑性はそれぞれ50 μmおよび10 μm以内と、ハイコンテンツアプリケーションに最適化されています。
- ▶ 自家蛍光と複屈折が低く保たれています。
- ▶ フィルムの厚さ127 μm(スタンダードベース)、または厚さ190 μm(ローベース)から選択可能です。
- ▶ ローベースマイクロプレートは、高開口対物レンズを使用してもすべてのウェルが遮られることなく読み取り可能です。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
4681	スタンダードベースウェルプレート、フタ付き	黒クリア	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚 / 包	20枚	3,235	64,700
4518	ローベースウェルプレート、フタ付き	黒クリア	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚 / 包	20枚	3,465	69,300

## Corning® 384 ウェル ハイコンテンツスクリーニング用マイクロプレート、ガラスボトム

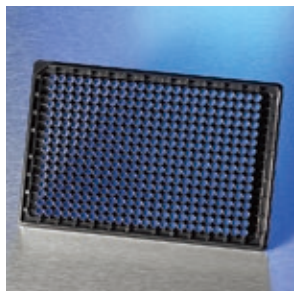

細胞イメージ解析装置を用いたハイコンテンツセルベースアッセイに最適なガラスボトムプレートです。平滑で透明度の高いガラスにより、オートフォーカスの時間を短縮し、スループットを高めめます。

- ▶ 光学品質の傷が付きにくいガラスを使用しています。
- ▶ イメージング顕微鏡に適合した厚さ200 μmのガラスボトムです。
- ▶ ウェルボトムの平滑性は50 μm以下で細胞イメージ解析装置に適しています。
- ▶ バックグラウンド蛍光が低く、クロストークが少ないため、セルベースアッセイに最適です。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
4581	ガラスボトムプレート、フタ付き	黒	平底	無処理	済み	個別包装	10枚	3,060	30,600
4583	ガラスボトムプレート、フタ付き	黒	平底	コラーゲンI	済み*	個別包装	10枚	6,980	69,800
4585	ガラスボトムプレート、フタ付き	黒	平底	フィブロネクチン	済み*	個別包装	10枚	8,150	81,500
4587	ガラスボトムプレート、フタ付き	黒	平底	ポリ-D-リジン	済み*	個別包装	10枚	6,980	69,800

\*無菌的に製造しています。

## Corning 384 ウェル ポリプロピレン製ストレージマイクロプレートとストレージブロック



384ウェルポリプロピレン製ストレージマイクロプレート

Corning ポリプロピレン製マイクロプレートには、アッセイやストレージの必要に応じて小容量や大容量ウェルの形状のものがあります。

### 384 ウェルポリプロピレン製マイクロプレートの規格とウェル容量

ウェル形状	1ウェル当たりの最大容量 (μL)	ウェルの深さ (mm)	ウェルの直径 (mm)	プレートのサイズ (横×縦×高さ) (mm)
384ウェル丸底プレート	95	11.56	3.63	127.76 × 85.48 × 14.22
384ウェル丸底ブロック	180	25.11	3.63	127.76 × 85.48 × 27.81
384ウェルV底ブロック	240	22.31	3.30*	127.76 × 85.48 × 24.73

\*スクエアウェルです。

- ▶ 一般的な有機溶媒(DMSO、エタノール、メタノール等)に対して耐性があります。
- ▶ 黒のポリプロピレン製マイクロプレート (カタログ番号 3658) は溶媒に対する耐性を必要とする蛍光アッセイに最適です。
- ▶ RNase/DNaseフリーです。
- ▶ シーリングテープやマットなどのマイクロプレート用アクセサリ製品の情報については、マイクロプレート用アクセサリの42~43ページを参照してください。

### 384 ウェルポリプロピレン製マイクロプレート製品

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	ウェル容量 (μL)	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
3658	標準タイプ	黒	丸底	95	なし	25枚 / 包	100枚	953	95,300
3656	標準タイプ	透明	丸底	95	済み	25枚 / 包	100枚	837	83,700
3657	標準タイプ	透明	丸底	95	なし	25枚 / 包	100枚	837	83,700

### 384 ウェルポリプロピレン製ストレージブロック製品


カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	ウェル容量 (μL)	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
3964	384ウェルブロック	透明	丸底	180	済み	5枚 / 包	25枚	1,256	31,400
3965	384ウェルブロック	透明	丸底	180	なし	5枚 / 包	100枚	1,189	118,900
3342	384ウェルブロック	透明	V底	240	済み	5枚 / 包	50枚	1,182	59,100
3347	384ウェルブロック	透明	V底	240	なし	5枚 / 包	50枚	1,114	55,700

## Corning® 1536 ウェル マイクロプレート


Corning 1536ウェルマイクロプレートはコーニングの製品では最もウェルの数が多く、ハイスループットスクリーニング用に最適です。このマイクロプレートのフットプリントとサイズは標準的なマイクロプレートと同じです。1536ウェルマイクロプレートには丸底または平底のポリスチレン製ソリッドプレート（白、黒）と、クリアボトム（黒）の形状のものがあります。

### 1536 ウェル 標準タイプポリスチレン製マイクロプレートの特長

- ▶ 1ウェル当たりの最大容量は丸底プレートが10  $\mu\text{L}$ 、平底プレートが12.8  $\mu\text{L}$ です。
- ▶ ワーキングボリュームは8  $\mu\text{L}$ 以下です。
- ▶ 丸底は気泡が入りにくく、CV値とZファクターが改善されます。
- ▶ ウェルの底部が高くなっているのでトップリーディング型のマイクロプレートリーダーで検出感度が上がります。
- ▶ プレートの四辺に付いているリザーバーによってあふれた試薬による装置へのコンタミネーションを防ぎます。
- ▶ カタログ番号末尾にBC表記されている製品は、あらかじめプレート側面の4辺にバーコードがついています。
- ▶ フタは別売りで、ユニバーサルリッド（カタログ番号 3098）をお使いいただけます。（フタやその他のマイクロプレート用アクセサリーに関する情報は42ページに掲載しております）

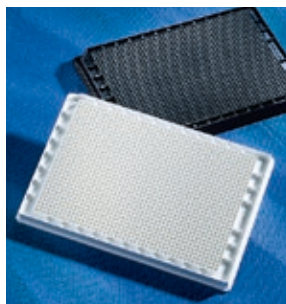

1536ウェルソリッド丸底  
マイクロプレート

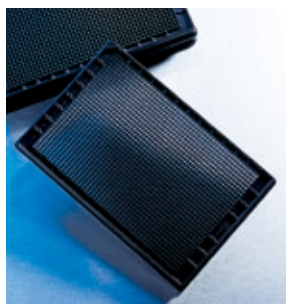


1536ウェルクリアボトム  
マイクロプレート（黒）

### Corning ローベース クリアボトムプレートの特長


標準タイプのプレートに比べて、ウェルの位置が低くプレート底面とウェルの底が1.8 mmと近いのが特長です。ボトムリーディング型のマイクロプレートリーダーで特に高い感度が期待できます。

- ▶ ローベースの黒クリアボトムプレートはプレート底部からウェルの底の距離が近いのでボトムリーディング型のマイクロプレートリーダー\*で特に高い感度が期待できます。

\*モレキュラーデバイス社のFLIPER TETRA™ システムとの互換性を確認しています。

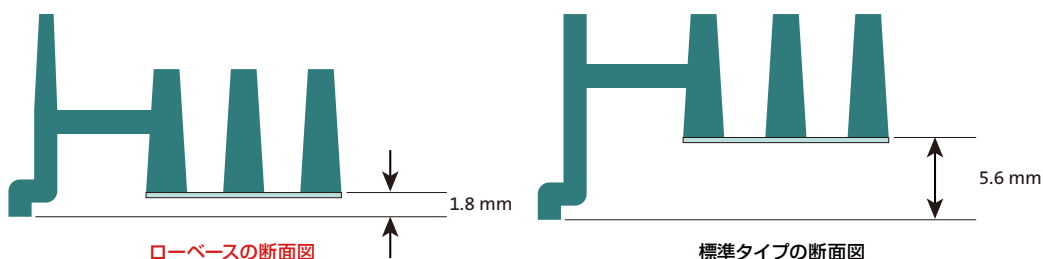


## Corning® スムーストッププレートの特長



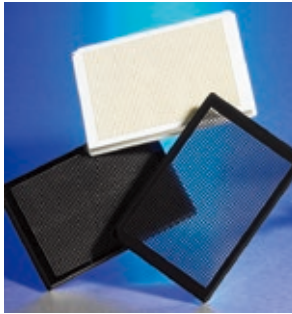


- ▶ ヒートシーラーや自動分注装置との互換性を高めるためにプレート外枠の天面からロゴとウェルの位置を示す英数字の刻印を取り去り、平坦にしました。
- ▶ 外枠に凸凹が無くシールとの接地面が大きくなるので密着性の改善が期待されます。
- ▶ プレート外枠がウェルの天面より低いので、ピンをプレート天面に近づけて分注するタイプの自動分注装置で特にハイスピードで高精度な分注が期待できます。


スムーストッププレート(一部)

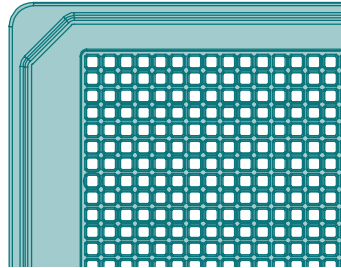

スムーストップ以外のプレート(一部)

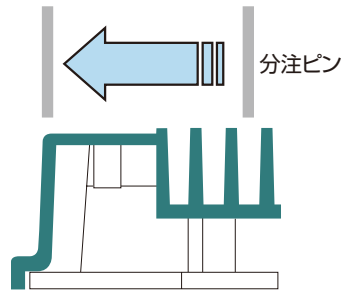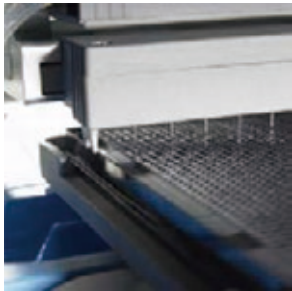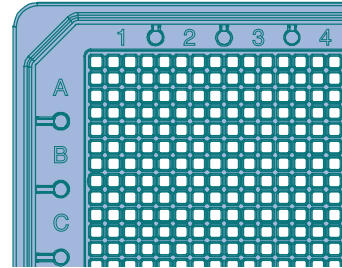


スムーストッププレート断面図(一部)

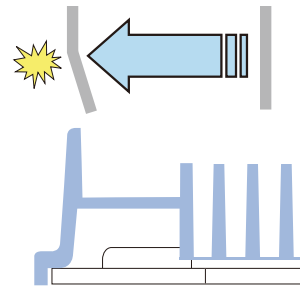


スムーストップ以外の1536ウェル断面図(一部)

標準タイプ スムーストッププレート

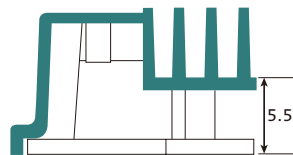

ウェルの底が高い位置にあるのでトップリディング型マイクロプレートリーダーで高い感度を得られることが期待できます。

ローベース スムーストッププレート

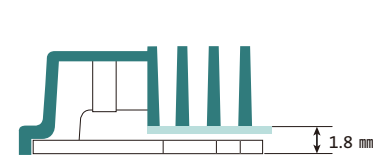



## 1536 ウェルポリスチレン製マイクロプレート製品

カタログ 番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の 形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格 (円) 単価	ケース価格
<b>ソリッドマイクロプレート (黒、白)</b>									
3937	標準タイプ、フタなし	白	丸底	無処理	なし	10枚/包	50枚	3,818	190,900
3936	標準タイプ、フタなし	黒	丸底	無処理	なし	10枚/包	50枚	3,818	190,900
3724	標準タイプ、フタなし	黒	平底	無処理	なし	10枚/包	50枚	3,692	184,600
3724BC	標準タイプ、バーコード付き、フタなし	黒	平底	無処理	なし	10枚/包	50枚	4,062	203,100
3726	標準タイプ、フタ付き	黒	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚/包	50枚	3,818	190,900
3726BC	標準タイプ、バーコード付き、フタ付き	黒	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚/包	50枚	4,196	209,800
3728	標準タイプ、フタなし	黒	平底	NBS	なし	10枚/包	50枚	3,942	197,100
3728BC	標準タイプ、バーコード付き、フタなし	黒	平底	NBS	なし	10枚/包	50枚	4,330	216,500
3725	標準タイプ、フタなし	白	平底	無処理	なし	10枚/包	50枚	3,692	184,600
3725BC	標準タイプ、バーコード付き、フタなし	白	平底	無処理	なし	10枚/包	50枚	4,062	203,100
3727	標準タイプ、フタ付き	白	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚/包	50枚	3,818	190,900
3727BC	標準タイプ、バーコード付き、フタ付き	白	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚/包	50枚	4,196	209,800
3549	標準タイプ、フタなし	白	平底	コラーゲンI	済み***	10枚/包	50枚	7,052	352,600
3729	標準タイプ、フタなし	白	平底	NBS	なし	10枚/包	50枚	3,942	197,100
7246	標準タイプ、スムースストップ、フタなし	黒	平底	無処理	なし	10枚/包	50枚	2,718	135,900
7248	標準タイプ、スムースストップ、フタなし	黒	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚/包	50枚	3,026	151,300
3862*	標準タイプ、 スムースストップバーコード付き、フタなし	黒	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚/包	50枚	3,208	160,400
3864*	標準タイプ、 スムースストップバーコード付き、フタなし	黒	平底	NBS	なし	10枚/包	50枚	4,134	206,700
7247	標準タイプ、スムースストップ、フタなし	白	平底	無処理	なし	10枚/包	50枚	2,718	135,900
7249	標準タイプ、スムースストップ、フタなし	白	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚/包	50枚	3,038	151,900
3863*	標準タイプ、 スムースストップバーコード付き、フタなし	白	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚/包	50枚	3,208	160,400
3865*	標準タイプ、 スムースストップバーコード付き、フタなし	白	平底	NBS	なし	10枚/包	50枚	4,134	206,700
<b>クリアボトムマイクロプレート (黒)</b>									
3891	標準タイプ、フタなし	黒クリアボトム	平底	無処理	なし	10枚/包	50枚	7,628	381,400
3893	標準タイプ、フタ付き	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚/包	50枚	10,170	508,500
3893BC	標準タイプ、バーコード付き、 フタ付き	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚/包	50枚	11,184	559,200
3895	標準タイプ、フタなし	黒クリアボトム	平底	NBS	なし	10枚/包	50枚	8,902	445,100
3831	ローベース、フタなし	黒クリアボトム	平底	無処理	なし	10枚/包	50枚	7,628	381,400
3832**	ローベース、フタ付き	黒クリアボトム	平底	Corning® CellBIND	済み	10枚/包	50枚	12,092	604,600
3832BC**	ローベース、バーコード付き、 フタ付き	黒クリアボトム	平底	Corning CellBIND	済み	10枚/包	50枚	12,700	635,000
3838	ローベース、フタ付き	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚/包	50枚	10,170	508,500
3838BC	ローベース、バーコード付き、 フタ付き	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	10枚/包	50枚	11,184	559,200
3833	ローベース、スムースストップ、 フタなし	黒クリアボトム	平底	Corning CellBIND	済み	20枚/包	100枚	4,936	493,600
3835	ローベース、スムースストップ、 フタなし	黒クリアボトム	平底	無処理	なし	20枚/包	100枚	4,196	419,600
3836	ローベース、スムースストップ、 フタなし	黒クリアボトム	平底	細胞培養表面処理	済み	20枚/包	100枚	4,628	462,800
7467	ローベース、スムースストップ、 フタなし	黒クリアボトム	平底	コラーゲンI	済み***	20枚/包	100枚	10,578	1,057,800

\* 最少注文数量10ケースの受注発注品です。

\*\* 最少注文数量20ケースの受注発注品です。

\*\*\* 無菌的に製造しています。

## Corning® 1536 ウェル スフェロイドプレート




新しい独自デザインの透明丸底と黒いウェル壁面のマイクロプレートは、1枚のプレート内で三次元多細胞性スフェロイドの作製と解析を行うのに理想的です。超低接着表面が均一で再現性のある三次元多細胞性スフェロイド形成を可能にしました。透明丸底の底位置まで達する長めの黒色ウェル壁によりウェル間のクロストークを抑えます。

- ▶ 黒いマイクロプレートボディと透明な丸底です。
- ▶ 共有結合している超低接着表面がウェル表面への細胞吸着を抑えます。
- ▶ 新しいウェルの設計が、ウェル間で均一なシングルスフェロイドの形成を助け、自動イメージングを可能にします。
- ▶ 各ウェルをシールドするユニークなデザインでウェル間のクロストークを最小にします。
- ▶ 培養したスフェロイドを新しプレートに移す必要なく、同じマイクロプレートのままでアッセイできます。

カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
4637	スフェロイドプレート	黒クリア	丸底	超低接着	済み	個別包装	5枚	10,580	52,900
4527	スフェロイドプレート	黒クリア	丸底	超低接着	済み	10枚/包	50枚	10,474	523,700

## Corning 1536 ウェル COC マイクロプレート

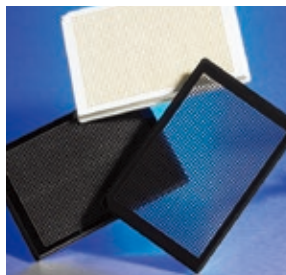

- ▶ サイクリックオレフィンコポリマー (COC)製
- ▶ シーリングに適したスムーズストップ型
- ▶ 黒クリアボトムプレートはローベース型
- ▶ クリアボトムの底は厚さ127 μmの非常に透明度の高いフィルムを採用
- ▶ 白ソリッドまたは黒ソリッドプレートはトップリーディング型のマイクロプレートリーダーで高い感度を期待できるハイベース型を採用
- ▶ 以下の表面処理からお選びいただけます
  - 細胞培養表面処理
  - Corning CellBIND® 表面
  - ポリ-D-リジンコート
  - ノンバインディングサーフェイス(NBS)
  - 無処理
- ▶ バーコード付き
- ▶ Kalypsys systemで使用する際のカスタムバーコードはご相談ください
- ▶ 自家蛍光が低く抑えられています
- ▶ DMSOやアルコールを含む広範囲の薬品に耐性があるのでアッセイのステップを簡略化できます
- ▶ オートメーション機器との相性が良い硬い材質です
- ▶ プレートの平滑性と均質性が最適化されています
- ▶ 複屈折性が低いプレートです
- ▶ フタは別売りです。マイクロプレート用アクセサリのページをご覧ください。

カタログ番号	プレートのフォーマット	表面処理	滅菌	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
4560	黒クリアボトム、ローベース、フタなし	無処理	なし	20枚/包	100枚	5,877	587,700
4561	黒クリアボトム、ローベース、フタなし	細胞培養表面	済み	20枚/包	100枚	6,464	646,400
4563	黒クリアボトム、ローベース、フタなし	Corning CellBIND	済み	20枚/包	100枚	7,052	705,200
4564	黒クリアボトム、ローベース、フタなし	ポリ-D-リジン	済み*	20枚/包	100枚	10,578	1,057,800
4565	黒ソリッド、ハイベース、フタなし	無処理	なし	10枚/包	50枚	4,702	235,100
4566	黒ソリッド、ハイベース、フタなし	細胞培養表面	済み	10枚/包	50枚	5,290	264,500
4567	黒ソリッド、ハイベース、フタなし	NBS	なし	10枚/包	50枚	4,938	246,900
4568	黒ソリッド、ハイベース、フタなし	Corning CellBIND	済み	10枚/包	50枚	5,876	293,800
4570	白ソリッド、ハイベース、フタなし	無処理	なし	10枚/包	50枚	4,702	235,100
4571	白ソリッド、ハイベース、フタなし	細胞培養表面	済み	10枚/包	50枚	5,290	264,500
4572	白ソリッド、ハイベース、フタなし	NBS	なし	10枚/包	50枚	4,938	246,900
4573	白ソリッド、ハイベース、フタなし	Corning CellBIND	済み	10枚/包	50枚	5,876	293,800

\* 無菌的に製造しています。

## Corning® マルチコートマイクロプレート



- ▶ Corning 1536 ウェル マルチコートマイクロプレートは、1枚のプレートで6種類の異なる表面処理を試すことができます。
- ▶ このマイクロプレートは、アッセイにおいて最適な表面処理を決定するのに大変有用で、本プレートの結果に基づいて、スクリーニングや実験を単一の表面処理で行う事ができます。
- ▶ コーティングはポリ-D-リジン、コラーゲンI、ゼラチン、ラミニン、フィブロネクチン、そして細胞培養表面処理です。


カタログ番号	プレートのフォーマット	色	ウェル底部の形状	表面処理	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円)	
								単価	ケース価格
3829*	クリアボトムプレート、フタ付き	黒クリアボトム	平底	6種類	済み**	10枚/包	10枚	31,730	317,300

\* 受注発注品です。ご注文いただいてからお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。

\*\*無菌的に製造しています。

## マイクロプレート用アクセサリ

### マイクロプレートフタ

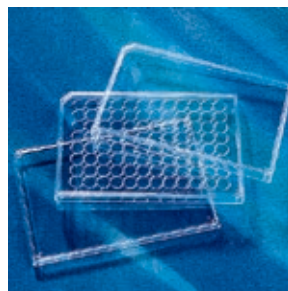

フタ

- ▶ フタは全てポリスチレン製です(記載がある場合を除く)。
- ▶ 全てのフタにCorning® マイクロプレートで統一されているA-1コーナーノッチがあります(記載がある場合を除く)。
- ▶ コーナーノッチのないユニバーサルリッド(カタログ番号 3098)は特定の方向でコーニングプレートにセットする必要はありません。このフタは標準タイプのフタよりもスカートが短くなっています。
- ▶ 黒色ユニバーサルリッド(カタログ番号 3935)は蛍光アッセイやその他のライトセンシティブなアッセイに適しています。
- ▶ サイクリックオレフィン製DMSO耐性リッド(カタログ番号 3085)は薄い褐色で、ライトセンシティブアッセイに適しています。100% DMSOに対して耐性があります。

カタログ番号	仕様	プレートの適合性	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
3930	フタ(コーナーノッチ型)、 蒸発防止リング付き	96ウェルマイクロプレート (2 mLブロック以外)	済み	個別包装	100枚	265	26,500
3931	フタ(コーナーノッチ型)、 蒸発防止リング付き	96ウェルマイクロプレート (2 mLブロック以外)	済み	25枚/包	50枚	260	13,000
3098	ユニバーサルリッド (コーナーノッチなし)	全てのマイクロプレート	済み	25枚/包	100枚	207	20,700
3099	ユニバーサルリッド (コーナーノッチ型)	全てのマイクロプレート	済み	25枚/包	50枚	236	11,800
3935	黒色ユニバーサルリッド (コーナーノッチ型)	全てのマイクロプレート	済み	25枚/包	50枚	300	15,000
3085	COC製DMSO耐性リッド (コーナーノッチなし)	全てのマイクロプレート	なし	25枚/包	50枚	388	19,400


### ストレージマットとアクセサリ



- ▶ 96、384ウェルプレートとブロックにご使用いただける様々な形状のマットがあります。
- ▶ カatalog番号 3080、3083はEVA(エチルビニルアセテート)ポリマー製です。このポリマーはDMSOに対して耐性があります。
- ▶ ストレージマットⅢはポリスチレン製96ウェルプレート(96ウェルハーフエアプレートは除く)、ポリプロピレン製96ウェルプレート(標準タイププレート、0.5 mL、1 mLストレージブロック)にお使い頂けます。
- ▶ カatalog番号 3080はタイトなシールができるようデザインされています。
- ▶ RNase/DNaseフリーです。

カタログ番号	仕様	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格(円) 単価	ケース価格
3080	丸型ウェルストレージマットⅢ (96ウェルプレート、ブロック用)	なし	25枚/包	100枚	366	36,600
3083	角型ウェルストレージマット(2 mL角型ブロック用)	なし	個別包装	50枚	526	26,300
3346	ストレージマット (拡大容量型96ウェルマイクロプレート用)	なし	10枚/包	50枚	496	24,800
3341	ストレージマット(384ウェルV底ブロック用)	なし	10枚/包	50枚	1,174	58,700

## シーリングテープ

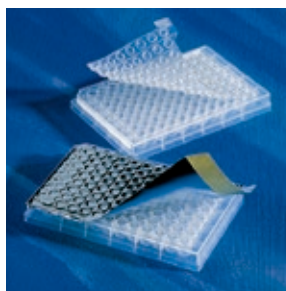

シーリングマット、テープ

- ▶ 着脱が容易で、短期保存にも長期保存にも適しています。
- ▶ ウェルを確実に密閉し、蒸発による濃縮を最小限に抑えます。
- ▶ ポリエステル製シーリングテープ (カタログ番号 4612) は、-40~120℃での使用に適しており、透明です。チップなどで突き破ることはできません。
- ▶ アルミシーリングテープ (カタログ番号 6569、6570) は、-80~150℃での使用に適しており、不透明です。チップなどで突き破ることができます。
- ▶ 通気性シーリングテープ (カタログ番号 3345) は、表面を介してガス交換を行うことができます。
- ▶ ユニバーサルオプティカルシーリングテープ (カタログ番号 6575) は-70~100℃での使用に適しており、透明です。

カタログ番号	仕様	滅菌処理	包装	1ケース	メーカー希望小売価格 (円)	
					単価	ケース価格
4612	ポリエステル製シーリングテープ (全てのマイクロプレート用)	なし	100枚 / 包	500枚	79	39,200
6524	ポリエチレン製シーリングテープ (96ウェルマイクロプレート用)	なし	100枚 / 包	100枚	98	9,800
6570	アルミシーリングテープ (96ウェルマイクロプレート用)	なし	100枚 / 包	100枚	107	10,700
6569	アルミシーリングテープ (384ウェルマイクロプレート用)	なし	100枚 / 包	100枚	107	10,700
3345	通気性シーリングテープ	済み	50枚 / 包	500枚	178	89,000
6575	ユニバーサルオプティカルシーリングテープ	なし	100枚 / 包	100枚	450	45,000
38446	遮光テープ (白)	なし	50枚 / 包	50枚	108	5,400
38496	遮光テープ (黒)	なし	50枚 / 包	50枚	108	5,400



## 厳選されたコーニングの技術情報

[www.corning.com/jp/lifesciences](http://www.corning.com/jp/lifesciences) にて、すべての技術情報はPDFで入手できます。

### Assay Microplates

#### ***Fluorescent Polarization Kinase Assay Miniaturization in Corning 96-well Half Area and 384-well Microplates (ALSP-AN-008)***

This 4-page technical note examines assay miniaturization in Corning 96-well, 96-well half area, and 384-well microplates using fluorescence polarization tyrosine kinase assays.

#### ***Comparative Analysis of Corning Microplates using the PerkinElmer® EnVision® Multilabel Microplate Reader (CLS-AN-131)***

This document compares and contrasts various 96-well and 384-well microplate formats in fluorescent and luminescent biochemical assays using the PerkinElmer EnVision multilabel microplate reader.

#### ***Impact of Microplate Choice on HTRF® Assay Performance (CLS-AN-096)***

This document compares and contrasts the importance of microplate color and geometry in determining HTRF assay performance.

#### ***Corning® NBS 384-well Low Volume Microplates Perform Well in Fluorescence Polarization Based Assays (CLS-AN-056)***

This brief 2-page technical report shows that NBS microplates do not interfere with the binding affinity of neurotensin receptors and perform well in FP-based receptor-ligand binding assays.

#### ***Performance Advantage of Corning Nonbinding Surface (NBS) Microplates in Homogeneous Biochemical Assays (CLS-AN-055)***

This brief 2-page technical report shows that NBS microplates provide the widest signal dynamic range and most stable fluorescence signals for this HTS assay versus not treated microplates.

#### ***Bar Code Basics Technical Bulletin (CLS-AN-021)***

This 3-page bulletin is a reference tool that provides the anatomy of a bar code and terminology pertaining to the bar code structure.

#### ***Understanding the Relationship Between Automation and Microplates (CLS-AN-182)***

Understanding the relationship between microplates and the instruments used to handle them is critical to performing any type of microplate-based assay. This document uses 384-well microplates (e.g., white solid bottom, black solid bottom, low volume, etc.) to illustrate the importance of choosing the correct microplate for an assay, as well as optimizing the reader for the microplate.

### Cell Culture Microplates

#### ***Helpful Hints to Manage Edge Effects of Cultured Cells for High Throughput Screening (CLS-AN-038W)***

This technical note is a compendium of techniques, collected from Corning cell culture facilities and customers, to reduce the occurrence of irregular patterns of cell adhesion or “edge effect” in microplates.

#### ***Poly-D-Lysine Coated Microplates (ALSP-AN-015)***

This 2-page application report describes binding and performance characteristics, as well as operating protocols for Corning Poly-D-Lysine microplates.

#### ***Corning CellBIND® Surface: an Improved Surface for Enhanced Cell Attachment (CLS-AN-057)***

The Corning CellBIND surface is a plasma surface treatment for tissue culture vessels. This optimized tissue culture surface treatment increases the oxygen content of the polymer surface resulting in improved hydrophilicity and wettability, which is known to improve cell spreading and attachment.

#### ***Miniaturization of a Calcium Mobilization Assay in 384-well Format (CLS-AN-068)***

In this study, we show a calcium mobilization assay that has been miniaturized to 25 µL to 40 µL using a 384-well low volume (LV) black clear bottom (BCB) microplate from Corning. The results demonstrate that the quality of the data and assay performance on this LV microplate are comparable to that obtained from 384-well normal volume (NV) microplates.

#### ***Miniaturization of a Luciferase Reporter Gene Assay Show Enhanced Assay Performance with Considerable Cost Savings (CLS-AN-093)***

This short application note describes cost savings and cell-based assay improvement made possible by moving from a normal to a low volume 384-well format.

#### ***Considerations When Using Frozen Cells for High Throughput Cell-based Assays (CLS-AN-117)***

This document discusses the advantages and disadvantages of using batch-frozen versus continuously cultured cells in multiple assay formats.

#### ***Instrument and Microplate Considerations to Improve Image Capture and Data Generation During High Content Screens (CLS-AN-081)***

Optimization of several parameters is essential during the development of a robust and informative high content screen, particularly when considering the complexity involved in cell-based assays. This 8-page report evaluates the impacts of instrument settings and microplate characteristics on assay robustness and data validity and provides a guide for significantly improving results when conducting a high content screen.

## 索引・価格表

カタログ番号	受発注品	製品名	個/パック	個/ケース	希望小売価格 (円)	ページ
2481		1×8 ローボリューム ストリップウェル 透明 平底 高結合型 非滅菌 フタなし	25	100	155,600	29
2482		1×8 ローボリューム ストリップウェル 黒 平底 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	188,100	29
2483	◎ (10)	1×8 ローボリューム ストリップウェル 黒 平底 高結合型 非滅菌 フタなし	25	100	188,100	29
2484	◎ (10)	1×8 ローボリューム ストリップウェル 白 平底 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	188,100	29
2485		1×8 ローボリューム ストリップウェル 白 平底 高結合型 非滅菌 フタなし	25	100	188,100	29
2572		1×8 ストリップウェル 平底用ホルダー	5	20	13,000	29
2578		1×8 ストリップウェル イジェクター	5	5	13,000	29
2580		1×8 ストリップウェル 透明 平底 高結合型 非滅菌 フタなし (ホルダーなし)	200	800	57,400	29
2593		1×8 ストリップウェル 透明 平底 無処理 非滅菌 フタなし (ホルダー付)	25	100	93,300	29
2797		ジェネラルアッセイプレート PVC 製 96ウェル 丸底 非滅菌 フタなし	25	100	30,200	28
3080		ストレージマットⅢ	25	100	36,600	42
3083		ストレージマットアッセイブロック 2 mL 用	1	50	26,300	42
3085		フタ (DMSO、ノッチなし)	25	50	19,400	42
3098		フタ (ユニバーサル、ノッチなし)	25	100	20,700	42
3099		フタ (ユニバーサル、コーナーノッチ型)	25	50	11,800	42
3300		CellBIND 96ウェルプレート 透明 平底 フタ付	5	50	33,200	22
3340		CellBIND 96ウェルクリアボトムプレート 黒 フタ付	5	50	108,400	24
3341		ストレージマット 384ウェル (#3347、#3342 用)	10	50	58,700	42
3342		アッセイブロック 384ウェル ポリプロピレン製 V 底 滅菌済み	5	50	59,100	36
3343		ジェネラルアッセイプレート ポリプロピレン製 96ウェル 拡大容量プレート V 底 非滅菌	10	50	26,600	30
3344		ジェネラルアッセイプレート ポリプロピレン製 96ウェル 拡大容量プレート V 底 滅菌済み	10	50	29,900	30
3345		テープ (通気性シーリングテープ 滅菌済み)	50	500	89,000	43
3346		ストレージマット 96ウェル 拡大容量 (#3343、#3344 用)	10	50	24,800	42
3347		アッセイブロック 384ウェル ポリプロピレン製 V 底 非滅菌	5	50	55,700	36
3355		フルオレッセンススルミネッセンス 96ウェルプレート ポリプロピレン製 丸底 白 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	54,600	30
3356		フルオレッセンススルミネッセンス 96ウェルプレート ポリプロピレン製 丸底 黒 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	54,600	30
3357		ジェネラルアッセイプレート ポリプロピレン製 96ウェル パーフェクトプレート V 底 滅菌済み	25	100	46,400	30
3358		マルチプルウェルプレート 96ウェル 丸底 フタ付 (20 枚 / 包)	20	100	59,400	22
3359		ジェネラルアッセイプレート ポリプロピレン製 96ウェル パーフェクトプレート 丸底 滅菌済み	25	100	46,400	30
3360		マルチプルウェルプレート 96ウェル 丸底 フタなし	25	100	51,500	22
3361		EIA/RIA プレート 96ウェル 平底 高結合型 滅菌済み フタ付	20	100	59,600	22、23
3362		フルオレッセンススルミネッセンス 96ウェルプレート 平底 白 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタなし	25	100	77,800	23
3363		ジェネラルアッセイプレート ポリプロピレン製 96ウェル パーフェクトプレート V 底 非滅菌	25	100	42,400	30
3364		ジェネラルアッセイプレート ポリプロピレン製 96ウェル パーフェクトプレート 平底 非滅菌	25	100	42,400	30
3365		ジェネラルアッセイプレート ポリプロピレン製 96ウェル パーフェクトプレート 丸底 非滅菌	25	100	42,400	30
3366		EIA/RIA プレート 96ウェル 丸底 高結合型 非滅菌 フタなし	25	100	48,100	22、23
3367		ジェネラルアッセイプレート ポリスチレン製 96ウェル 丸底 滅菌済み フタなし	1	50	22,200	22
3368		EIA/RIA プレート 96ウェル イージーウォッシュ 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	45,400	22、23
3369		EIA/RIA プレート 96ウェル イージーウォッシュ 高結合型 非滅菌 フタなし	25	100	49,200	22、23
3370		ジェネラルアッセイプレート ポリスチレン製 96ウェル 平底 滅菌済み フタ付	20	100	50,300	22
3474		超低接着表面プレート 96ウェル 平底 フタ付	1	24	46,200	22
3540		ローボリューム クリアボトムプレート 384ウェル 黒 平底 無処理 非滅菌 フタなし	10	50	74,100	33
3542		ローボリューム クリアボトムプレート 384ウェル 黒 平底 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	10	50	92,600	33
3544		ローボリューム クリアボトムプレート 384ウェル 黒 NBS 非滅菌 フタなし	10	50	105,000	33
3549		1536 ウェルプレート 白 平底 コラーゲン 滅菌済み フタなし	10	50	352,600	39
3570		384ウェルソリッドプレート ローフランジ 白 平底 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	10	50	54,400	32
3571		384ウェルソリッドプレート ローフランジ 黒 平底 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	10	50	54,400	32



## 索引・価格表

カタログ番号	受注発注品	製品名	個/パック	個/ケース	希望小売価格 (円)	ページ
3572		384ウェルソリッドプレート ローフランジ 白 平底 無処理 非滅菌 フタなし	10	50	43,300	32
3573		384ウェルソリッドプレート ローフランジ 黒 平底 無処理 非滅菌 フタなし	10	50	43,300	32
3574		384ウェルソリッドプレート ローフランジ 白 平底 NBS 非滅菌 フタなし	10	50	67,900	32
3575		384ウェルソリッドプレート ローフランジ 黒 平底 NBS 非滅菌 フタなし	10	50	67,900	32
3576		384ウェルソリッドプレート ローフランジ 白 平底 高結合 非滅菌 フタなし	10	50	47,700	32
3577		384ウェルソリッドプレート ローフランジ 黒 平底 高結合 非滅菌 フタなし	10	50	47,700	32
3585		マルチブルウェルプレート 96ウェル 平底 フタ付低蒸発構造 (5枚/包)	5	50	29,100	22
3590		EIA/RIA プレート 96ウェル 平底 高結合型 非滅菌 フタなし	1	100	46,600	22、23
3591		EIA/RIA プレート 96ウェル 平底 無処理 非滅菌 フタなし	1	50	22,700	22、23
3595		マルチブルウェルプレート 96ウェル 平底 フタ付低蒸発構造 (個別)	1	50	29,600	22
3596		マルチブルウェルプレート 96ウェル 平底 フタ付 (個別)	1	50	29,100	22
3598		マルチブルウェルプレート 96ウェル 平底 フタ付 (5枚/包)	5	100	55,100	22
3599		マルチブルウェルプレート 96ウェル 平底 フタ付 (個別)	1	100	58,100	22
3600		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルプレート 平底 白 NBS 非滅菌 フタなし	25	100	103,600	23
3601		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルクリアボトムプレート 黒 高結合型 非滅菌 フタなし	25	100	196,800	24
3603		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルクリアボトムプレート 黒 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	1	48	94,600	24
3604		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルクリアボトムプレート 白 NBS 非滅菌 フタなし	25	100	207,400	24
3605		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルプレート 丸底 白 NBS 非滅菌 フタなし	25	100	110,300	23
3610		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェル クリアボトムプレート 白 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	1	48	94,600	24
3614		96ウェル スペシャルオプティックス 黒クリアボトム 平底 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタなし	25	100	188,100	24
3615		96ウェル スペシャルオプティックス 黒クリアボトム 平底 無処理 滅菌なし フタなし	25	100	175,000	24
3628		マルチブルウェルプレート 96ウェル 平底 フタ付セレーションなし (20枚/包)	20	100	55,100	22
3631		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルクリアボトムプレート 黒 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	157,500	24
3632		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルクリアボトムプレート 白 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	157,500	24
3635		UV プレート 96ウェル	25	50	105,700	28
3640		384ウェルソリッドプレート 透明 平底 NBS 非滅菌 フタなし	25	100	129,800	32
3641		NBS 96ウェルプレート 透明 平底 フタなし	25	100	90,700	22
3642		ハーフエリア 96ウェルプレート 白 NBS 滅菌済みフタなし	25	100	116,700	23
3643		ポリ-D- リジン 384ウェル ローボリュームクリアボトムプレート 黒 平底 フタ付	10	50	216,000	33
3650		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルプレート 平底 黒 NBS 非滅菌 フタなし	25	100	103,600	23
3651		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルクリアボトムプレート 黒 NBS 非滅菌 フタなし	25	100	207,400	24
3656		アッセイプレート 384ウェル ポリプロピレン製 滅菌済み	25	100	83,700	36
3657		アッセイプレート 384ウェル ポリプロピレン製 非滅菌	25	100	83,700	36
3658		384ウェルソリッドプレート ポリプロピレン製 黒 丸底 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	95,300	36
3679		UV プレート 96ウェル ハーフエリア	25	50	111,100	28
3680		384ウェルソリッドプレート 透明 平底 無処理 滅菌済み フタ付	20	100	86,500	32
3686		ハーフエリア 96ウェルソリッドプレート 平底 黒 NBS 非滅菌 フタなし	25	100	116,700	23
3688		ハーフエリア 96ウェルソリッドプレート 平底 白 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	20	100	101,100	23
3690		ハーフエリア 96ウェルソリッドプレート 平底 透明 高結合型 非滅菌 フタなし	25	100	51,900	22
3693		ハーフエリア 96ウェルソリッドプレート 平底 白 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	64,900	23
3694		ハーフエリア 96ウェルソリッドプレート 平底 黒 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	64,900	23
3695		ハーフエリア 96ウェルソリッドプレート 平底 透明 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	47,900	22
3696		マルチブルウェルプレート 96ウェル ハーフエリア 平底 フタ付 (個別)	1	50	36,400	22
3697		ハーフエリア 96ウェルソリッドプレート 平底 透明 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	20	100	69,200	22
3700		384ウェルソリッドプレート 透明 平底 高結合型 非滅菌 フタなし	25	100	74,100	32
3701		384ウェルソリッドプレート 透明 平底 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	20	100	105,000	32
3702		384ウェルソリッドプレート 透明 平底 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	74,100	32

## 索引・価格表

カタログ番号	受注発注品	製品名	個/パック	個/ケース	希望小売価格 (円)	ページ
3724		1536ウェルプレート 黒 平底 無処理 非滅菌 フタなし	10	50	184,600	39
3725		1536ウェルプレート 白 平底 無処理 非滅菌 フタなし	10	50	184,600	39
3726		1536ウェルプレート 黒 平底 細胞培養表面処理 滅菌済み フタ付	10	50	190,900	39
3727		1536ウェルプレート 白 平底 細胞培養表面処理 滅菌済み フタ付	10	50	190,900	39
3728		1536ウェルプレート 黒 平底 NBS 非滅菌 フタなし	10	50	197,100	39
3729		1536ウェルプレート 白 平底 NBS 非滅菌 フタなし	10	50	197,100	39
3762		384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	209,800	33
3763		384 ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 白 平底 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	209,800	33
3764		384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	20	100	235,300	33
3765		384 ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 白 平底 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	20	100	235,300	33
3766		384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 NBS 非滅菌 フタなし	25	100	254,200	33
3767		384 ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 白 平底 NBS 非滅菌 フタなし	25	100	254,200	33
3768		ポリ-D- リジン 384 ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付	20	100	419,600	33
3769		ポリ-D- リジン 384 ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 白 平底 フタ付	20	100	419,600	33
3770		CellBIND 384ウェル ローフランジ クリアボトム 黒 滅菌 フタ付	20	100	246,900	33
3788		ジェネラルアッセイプレート ポリスチレン製 96ウェル 丸底 滅菌済み フタ付	20	100	50,300	22
3789A		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルプレート 丸底 白 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	58,500	23
3792		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルプレート 丸底 黒 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	58,500	23
3795		ジェネラルアッセイプレート ポリスチレン製 96ウェル 丸底 滅菌済み フタなし	25	100	41,700	22
3797		EIA/RIA プレート 96ウェル 丸底 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	32,800	22、23
3798		ジェネラルアッセイプレート ポリスチレン製 96ウェル 丸底 非滅菌 フタなし	25	100	36,600	22
3799		マルチプルウェルプレート 96ウェル 丸底 フタ付 (個別)	1	50	29,800	22
3820		ローボリュームソリッドプレート 384ウェル 黒 平底 NBS 非滅菌 フタなし	10	50	86,300	32
3821		ローボリュームソリッドプレート 384ウェル 黒 平底 無処理 非滅菌 フタなし	10	50	61,700	32
3822		ローボリュームソリッドプレート 384ウェル 黒 平底 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	10	50	74,100	32
3823	○	マルチコートマイクロプレート 96ウェル クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付	10	10	105,700	26
3824		ローボリュームソリッドプレート 384ウェル 白 平底 NBS 非滅菌 フタなし	10	50	86,300	32
3825		ローボリュームソリッドプレート 384 ウェル 白 平底 無処理 非滅菌 フタなし	10	50	61,700	32
3826		ローボリュームソリッドプレート 384ウェル 白 平底 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	10	50	74,100	32
3829	○	マルチコートマイクロプレート 1536ウェル クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付	10	10	317,300	41
3830		超低接着表面 384ウェル スフェロイドクリアボトムプレート 黒 丸底 フタ付	10	50	157,100	35
3831		1536ウェル クリアボトムプレート 黒 ローベース 無処理 非滅菌 フタなし	10	50	381,400	39
3832	◎ (20)	CellBIND 1536ウェル クリアボトムプレート 黒 ローベース 滅菌済み フタ付	10	50	604,600	39
3833		1536ウェル クリアボトムプレート 黒 ローベース スムーストップ CellBIND 滅菌済み フタなし	20	100	493,600	39
3835		1536ウェル クリアボトムプレート 黒 ローベース スムーストップ 無処理 非滅菌 フタなし	20	100	419,600	39
3836		1536ウェル クリアボトムプレート 黒 ローベース スムーストップ 細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし	20	100	462,800	39
3838		1536ウェル クリアボトムプレート 黒 ローベース 細胞培養表面処理 滅菌済み フタ付	10	50	508,500	39
3841		ポリ-D- リジン 96ウェルプレート 透明 平底 フタ付	20	100	246,900	22
3842		ポリ-D- リジン 96ウェル クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付	20	100	296,200	24
3843		ポリ-D- リジン 96ウェル クリアボトムプレート 白 平底 フタ付	20	100	296,200	24
3844		ポリ-D- リジン 384ウェルプレート 透明 平底 フタ付	20	100	359,400	32
3862	◎ (10)	1536ウェルプレート 黒 平底 スムーストップ細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし バーコード付き	10	50	160,400	39
3863	◎ (10)	1536ウェルプレート 白 平底 スムーストップ細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし バーコード付き	10	50	160,400	39
3864	◎ (10)	1536ウェルプレート 黒 平底 スムーストップ NBS 非滅菌 フタなし バーコード付き	10	50	206,700	39
3865	◎ (10)	1536ウェルプレート 白 平底 スムーストップ NBS 非滅菌 フタなし バーコード付き	10	50	206,700	39
3875		ハーフエリア 96ウェルソリッドプレート 黒 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	20	100	101,100	23
3879		マルチウェルプレート 96ウェル 丸底 フタ付ポリプロピレン製 (個別)	1	50	33,100	30

## 索引・価格表

カタログ番号	受注発注品	製品名	個/パック	個/ケース	希望小売価格 (円)	ページ
3880		ハーフエリア 96ウェルクリアボトムプレート 黒 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	168,500	24
3881		ハーフエリア 96ウェルクリアボトムプレート 黒 NBS 非滅菌 フタなし	25	100	217,900	24
3882		ハーフエリア 96ウェルクリアボトムプレート 黒 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	20	100	198,500	24
3883		ハーフエリア 96ウェルクリアボトムプレート 白 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	168,500	24
3884		ハーフエリア 96ウェルクリアボトムプレート 白 NBS 非滅菌 フタなし	25	100	217,900	24
3885		ハーフエリア 96ウェルクリアボトムプレート 白 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	20	100	198,500	24
3886		ハーフエリア 96ウェルクリアボトムプレート 白 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタなし	25	100	178,900	24
3887A		ハーフエリア 96ウェルクリアボトムプレート 黒 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタなし	25	100	178,900	24
3891		1536ウェルクリアボトムプレート 黒 平底 無処理 非滅菌 フタなし	10	50	381,400	39
3893		1536ウェルクリアボトムプレート 黒 平底 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	10	50	508,500	39
3894		マルチプルウェルプレート 96ウェル V 底 フタ付 (個別)	1	50	38,600	22
3895		1536ウェルクリアボトムプレート 黒 NBS 非滅菌 フタなし	10	50	445,100	39
3896		ジェネラルアッセイプレート ポリスチレン製 96ウェル V 底 滅菌済み フタなし	1	48	21,400	22
3897		ジェネラルアッセイプレート ポリスチレン製 96ウェル V 底 非滅菌 フタなし	25	100	37,800	22
3898		ジェネラルアッセイプレート ポリスチレン製 96ウェル V 底 非滅菌 フタなし	25	100	37,800	22
3903		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルクリアボトムプレート 白 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	20	100	188,100	24
3904		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルクリアボトムプレート 黒 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	20	100	188,100	24
3912		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルプレート 平底 白 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	54,100	23
3913		1×8 ストリップウェル 白 平底 無処理 滅菌なし フタなし (ホルダー付)	25	100	97,300	29
3914		1×8 ストリップウェル 黒 平底 無処理 滅菌なし フタなし (ホルダー付)	25	100	97,300	29
3915		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルプレート 平底 黒 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	54,100	23
3916		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルプレート 平底 黒 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	20	100	84,400	23
3917		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルプレート 平底 白 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	20	100	84,400	23
3922		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルプレート 平底 白 高結合型 非滅菌 フタなし	25	100	54,100	23
3923		1×8 ストリップウェル 白 平底 高結合型 滅菌なし フタなし (ホルダー付)	25	100	97,300	29
3924		1×8 ストリップウェル 黒 平底 高結合型 滅菌なし フタなし (ホルダー付)	25	100	97,300	29
3925		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルプレート 平底 黒 高結合型 非滅菌 フタなし	25	100	54,100	23
3930		フタ (コーナーノッチ型、個別包装)	1	100	26,500	42
3931		フタ (コーナーノッチ型、25 枚 / 包)	25	50	13,000	42
3935		フタ (黒ユニバーサル、コーナーノッチ型)	25	50	15,000	42
3936		1536ウェルプレート 10 μL 黒 U 底 無処理 非滅菌 フタなし	10	50	190,900	39
3937		1536ウェルプレート 10 μL 白 U 底 無処理 非滅菌 フタなし	10	50	190,900	39
3956		アッセイブロック 96ウェル 0.5 mL ポリプロピレン製 V 底 滅菌済み	10	50	32,100	30
3957		アッセイブロック 96ウェル 0.5 mL ポリプロピレン製 V 底 非滅菌	10	100	63,900	30
3958		アッセイブロック 96ウェル 1 mL ポリプロピレン製 丸底 滅菌済み	5	25	20,800	30
3959		アッセイブロック 96ウェル 1 mL ポリプロピレン製 丸底 非滅菌	5	100	83,500	30
3960		アッセイブロック 96ウェル 2 mL ポリプロピレン製 V 底 滅菌済み	5	25	31,400	30
3961		アッセイブロック 96ウェル 2 mL ポリプロピレン製 V 底 非滅菌	5	100	124,800	30
3964		アッセイブロック 384ウェル ポリプロピレン製 滅菌済み	5	25	31,400	36
3965		アッセイブロック 384ウェル ポリプロピレン製 非滅菌	5	100	118,900	36
3985		384ウェル オプティカルイメージングプレート 黒クリアボトム 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	20	100	254,200	33
3990		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルプレート 平底 白 NBS 非滅菌 フタなし (5 枚 / 包)	5	25	27,100	23
3991		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルプレート 平底 黒 NBS 非滅菌 フタなし (5 枚 / 包)	5	25	27,100	23
3992		NBS 96ウェルハーフエリアプレート 白 平底 フタなし	5	25	29,100	23
3993		ハーフエリア 96ウェルソリッドプレート 平底 黒 NBS 非滅菌 フタなし (5 枚 / 包)	5	25	30,700	23
3994		ハーフエリア 96ウェルクリアボトムプレート 白 NBS 非滅菌 フタなし (5 枚 / 包)	5	25	57,300	24
3995		フルオレッセンスルミネッセンス 96ウェルクリアボトムプレート 白 NBS 非滅菌 フタなし (5 枚 / 包)	5	25	54,400	24

## 索引・価格表

カタログ番号	受発注品	製品名	個/パック	個/ケース	希望小売価格 (円)	ページ
3997		マルチプルウェルプレート 96ウェル 平底 フタ付 (10枚 / 包)	10	50	29,100	22
4510		384ウェル ローボリュームプレート 黒丸底 高結合型 フタなし	10	50	47,900	32
4511		384ウェル ローボリュームプレート 黒丸底 無処理 フタなし	10	50	47,900	32
4512		384ウェル ローボリュームプレート 白丸底 無処理 フタなし	10	50	47,900	32
4513		384ウェル ローボリュームプレート 白丸底 NBS フタなし	10	50	73,200	32
4514		384ウェル ローボリュームプレート 黒丸底 NBS フタなし	10	50	73,200	32
4515		超低接着表面 96ウェル スフェロイド クリアボトムプレート 黒丸底 フタ付 5枚入	1	5	15,200	26
4516		超低接着表面 384ウェル スフェロイド クリアボトムプレート 黒丸底 フタ付 5枚入	1	5	16,300	35
4517		ハーフエリア 96ウェル ローベース COC フィルムボトム プレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付	20	20	51,700	27
4518		384ウェル ローベース COC フィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付	20	20	69,300	35
4520		超低接着表面 96ウェル スフェロイド クリアボトムプレート 黒丸底 フタ付	10	50	145,500	26
4527		超低接着表面 1536ウェル スフェロイド クリアボトムプレート 黒丸底 フタ付	10	50	523,700	40
4560		1536ウェル クリアボトムプレート 黒 COC 無処理 非滅菌 フタなし	20	100	587,700	40
4561		1536ウェル クリアボトムプレート 黒 COC 細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし	20	100	646,400	40
4563		1536ウェル クリアボトムプレート 黒 COC CellBIND 滅菌済み フタなし	20	100	705,200	40
4564		1536ウェル クリアボトムプレート 黒 COC PDL 非滅菌 フタなし	20	100	1,057,800	40
4565		1536ウェル プレート 黒 平底 COC 無処理 非滅菌 フタなし	10	50	235,100	40
4566		1536ウェル プレート 黒 平底 COC 細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし	10	50	264,500	40
4567		1536ウェル プレート 黒 平底 COC NBS 非滅菌 フタなし	10	50	246,900	40
4568		1536ウェル プレート 黒 平底 COC CellBIND 滅菌済み フタなし	10	50	293,800	40
4570		1536ウェル プレート 白 平底 COC 無処理 非滅菌 フタなし	10	50	235,100	40
4571		1536ウェル プレート 白 平底 COC 細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし	10	50	264,500	40
4572		1536ウェル プレート 白 平底 COC NBS 非滅菌 フタなし	10	50	246,900	40
4573		1536ウェル プレート 白 平底 COC CellBIND 滅菌済み フタなし	10	50	293,800	40
4580		ハーフエリア 96ウェル ガラスボトムプレート 黒 無処理 滅菌済み フタ付 個別包装	1	10	25,900	27
4581		ローボリューム ガラスボトムプレート 384ウェル 黒 平底 無処理 滅菌済み フタ付 個別包装	1	10	30,600	36
4582		バイオコート コラーゲンIコート ハーフエリア 96ウェル ガラスボトムプレート 黒 フタ付	1	10	58,200	27
4583		バイオコート コラーゲンIコート 384ウェル ガラスボトムプレート 黒 フタ付	1	10	69,800	36
4584		バイオコート フィブロネクチンコート ハーフエリア 96ウェル ガラスボトムプレート 黒 フタ付	1	10	69,800	27
4585		バイオコート フィブロネクチンコート 384ウェル ガラスボトムプレート 黒 フタ付	1	10	81,500	36
4586		バイオコート ポリ-D-リジンコート ハーフエリア 96ウェル ガラスボトムプレート 黒 フタ付	1	10	58,200	27
4587		バイオコート ポリ-D-リジンコート 384ウェル ガラスボトムプレート 黒 フタ付	1	10	69,800	36
4588		超低接着表面 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付	20	100	222,200	33
4589	○	マルチコートマイクロプレート 384ウェル クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付	1	10	152,800	34
4591		超低接着表面プレート 96ウェル 丸底 黒色 フタ付	1	24	52,200	23
4596		フィブロネクチン 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付	20	100	537,200	33
4612		テープ (シールテープ, ポリエステル)	100	500	39,200	43
4637		超低接着表面プレート 1536ウェル スフェロイド クリアボトムプレート 黒丸底 フタ付	1	5	52,900	40
4680		ハーフエリア 96ウェル COC フィルムボトムプレート 黒クリア 細胞培養表面処理 フタ付	4	16	37,700	27
4681		384ウェル COC フィルムボトムプレート 黒クリア 細胞培養表面処理 フタ付	10	20	64,700	35
4690		コラーゲン 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付	20	100	419,600	33
6524		PCR プレート密閉用テープ (ポリエチレン)	100	100	9,800	43
6569		テープ (シールテープ, アルミ)	100	100	10,700	43
6570		PCR プレートアルミシールテープ 96ウェル用	100	100	10,700	43
6575		テープ (ユニバーサルオプティカルシーリングテープ)	100	100	45,000	43
7007		超低接着表面プレート 96ウェル 丸底 フタ付	1	24	46,200	22
7246		1536ウェル プレート 黒 平底 スムースストップ無処理 非滅菌 フタなし	10	50	135,900	39

## 索引・価格表

カタログ番号	受発注品	製品名	個/パック	個/ケース	希望小売価格 (円)	ページ
7247		1536ウェルプレート 白 平底 スムースストップ無処理 非滅菌 フタなし	10	50	135,900	39
7248		1536ウェルプレート 黒 平底 スムースストップ細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし	10	50	151,300	39
7249		1536ウェルプレート 白 平底 スムースストップ細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし	10	50	151,900	39
7467		1536ウェルクリアボトムプレート 黒 コラーゲン フタなし	20	100	1,057,800	39
9017		EIA/RIA プレート 96ウェル 平底 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	40,200	22、23
9018		EIA/RIA プレート 96ウェル 平底 高結合型 非滅菌 フタなし	25	100	45,600	22、23
9102		マルチブルウェルプレート 8ウェルストリップ×12 ホルダー 平底フタ付 (個別)	1	50	60,100	22、29
38446		遮光シール (白)	50	50	5,400	43
38496		遮光シール (黒)	50	50	5,400	43
42592		1×8 新型ストリップウェル 透明 平底 高結合型 非滅菌 フタなし (ホルダー付)	25	100	93,300	29
43923	◎ (50)	1×8 新型ストリップウェル 白 平底 高結合型 非滅菌 フタなし (ホルダー付)	25	100	97,300	29
92592		1×8 ストリップウェル 透明 平底 高結合型 非滅菌 フタなし (ホルダー付)	25	100	93,300	29
351172		ノントリートメントプレート 96ウェル 平底 フタ付	1	50	27,300	24
351177		ノントリートメントプレート 96ウェル U 底 フタ付	1	50	27,300	24
351190		ポリプロピレン 96ウェル ライブラリー保存用プレート 350 μL U 底 (非滅菌)	25	100	40,800	30
353072		セルカルチャー 96ウェル マルチウェルプレート 平底 フタ付	1	50	28,700	24
353075		セルカルチャー 96ウェル マルチウェルプレート 平底 (353072 の 5 枚包装) フタ付	5	50	27,100	24
353077		セルカルチャー 96ウェル マルチウェルプレート U 底 フタ付	1	50	28,700	24
353219		96ウェルプレート 黒色ウェル / 透明ボトム細胞培養 フタ付	8	32	55,300	24
353227		セルカルチャー 96ウェル マルチウェルプレート (353077 の 5 枚包装) U 底 フタ付	5	50	28,700	24
353263		ポリプロピレン 96ウェル ライブラリー保存用プレート 340 μL V 底 (非滅菌)	25	100	50,700	30
353296		セルカルチャー 96ウェル オパック (白色不透明) プレート 平底 フタ付	5	50	40,100	24
353376		96ウェルプレート 平底 黒色ウェル 細胞培養 フタ付	8	32	23,700	24
353377		96ウェルプレート 平底 白色 / 透明 細胞培養 フタ付	8	32	55,300	24
353872		プライマリア 96ウェル マルチウェルプレート 平底 フタ付	1	50	41,800	24
353910		96ウェル アッセイプレート U 底 透明 スタンダード (非滅菌) フタなし	5	50	13,800	24
353916		セルカルチャー 96ウェル マルチウェルプレート 平底 フタ付	25	100	54,100	24
353936		セルカルチャー 96ウェル レディスタックプレート (353072 の 14 枚包装) 平底 フタ付	14	84	46,000	24
353961		384ウェルプレート 透明 細胞培養 フタ付	5	50	58,800	33
353962		384ウェルプレート 黒色 / 透明 細胞培養 フタ付	5	50	113,600	33
353963	○	384ウェルプレート 白色 / 透明 細胞培養 フタ付	5	50	113,600	33
353988		384ウェルプレート 白色 細胞培養 フタ付	5	50	60,500	33
354407		Corning® BioCoat® コラーゲン I マルチウェルプレート 96ウェル	5	5	7,500	25
354409		BioCoat フィブロネクチン マルチウェルプレート 96ウェル 2～8℃	1	5	17,100	25
354410		BioCoat ラミニン マルチウェルプレート 96ウェル 2～8℃	1	5	19,200	25
354429		BioCoat コラーゲン IV マルチウェルプレート 96ウェル 2～8℃	1	5	16,000	25
354461		BioCoat ポリ-D-リジン マルチウェルプレート 96ウェル	5	5	7,500	25
354516		BioCoat ポリ-L-リジン マルチウェルプレート 96ウェル	5	5	7,500	25
354519		BioCoat コラーゲン I マルチウェルプレート 96ウェル (白色オパック)	5	5	8,100	25
354596		BioCoat ポリ-D-リジン / ラミニンプレート 96ウェル 2～8℃	1	5	21,200	25
354607		BioCoat 薄層マトリゲル プレート 96ウェル 2～8℃	5	5	25,800	25
354620		BioCoat ポリ-D-リジン マルチウェルプレート 96ウェル (白色オパック)	5	5	8,100	25
354640		BioCoat ポリ-D-リジン マルチウェルプレート 96ウェル (黒色ウェル / 透明ボトム)	5	5	12,800	25
354649		BioCoat コラーゲン I マルチウェルプレート 96ウェル (黒色ウェル / 透明ボトム)	5	5	12,800	25
354650		BioCoat コラーゲン I マルチウェルプレート 96ウェル (白色ウェル / 透明ボトム)	5	5	12,800	25
354651		BioCoat ポリ-D-リジン マルチウェルプレート 96ウェル (白色ウェル / 透明ボトム)	5	5	12,800	25
354657		BioCoat ポリ-L-オルニチン / ラミニンプレート 96ウェル 2～8℃	1	5	21,200	25

## 索引・価格表

カタログ番号	受発注品	製品名	個/パック	個/ケース	希望小売価格 (円)	ページ
354660		Corning® BioCoat® ポリ-D- リジン 384ウェルプレート 白色 / 透明	5	5	18,300	34
354661		BioCoat ポリ-D- リジン 384ウェルプレート 白色	5	5	11,400	34
354662		BioCoat ポリ-D- リジン 384ウェルプレート	5	5	11,400	34
354663		BioCoat ポリ-D- リジン 384ウェルプレート 黒色 / 透明	5	5	18,300	34
354664		BioCoat コラーゲンI 384ウェルプレート 白色 / 透明	5	5	18,300	34
354665		BioCoat コラーゲンI 384ウェルプレート 白色	5	5	11,400	34
354666	○	BioCoat コラーゲンI プレート 384ウェル	5	5	11,400	34
354667		BioCoat コラーゲンI 384ウェルプレート 黒色 / 透明	5	5	18,300	34
354689		BioCoat ゼラチン マルチウェルプレート 96ウェル	5	5	10,900	25
354717		Corning PureCoat™ アミン 96ウェル 黒色/透明プレート	5	5	11,300	25
354719	○	PureCoat アミン 384ウェル 黒色 / 透明プレート	5	5	15,500	34
356256	○	マトリゲル基底膜マトリックス 3D プレート 384 ウェル 黒色 / 透明	1	5	143,300	35
356257	○	マトリゲル基底膜マトリックス 3D プレート 384 ウェル 白色 / 透明	1	5	143,300	35
356258	○	マトリゲル基底膜マトリックス 3D プレート 384 ウェル 白色 / 透明	1	1	29,800	35
356259	○	マトリゲル基底膜マトリックス 3D プレート 96 ウェル 黒色 / 透明	1	1	29,800	26
356407		BioCoat コラーゲンI マルチウェルプレート 96ウェル	5	50	61,000	25
356461		BioCoat ポリ-D- リジン マルチウェルプレート 96ウェル	5	50	61,000	25
356516		BioCoat ポリ-L- リジン マルチウェルプレート 96ウェル	5	50	61,000	25
356519		BioCoat コラーゲンI マルチウェルプレート 96ウェル (白色オパック)	5	50	67,400	25
356620		BioCoat ポリ-D- リジン マルチウェルプレート 96ウェル (白色オパック)	5	50	67,400	25
356640		BioCoat ポリ-D- リジン マルチウェルプレート 96ウェル (黒色ウェル / 透明ボトム)	5	50	102,800	25
356649		BioCoat コラーゲンI マルチウェルプレート 96ウェル (黒色ウェル / 透明ボトム)	5	50	102,800	25
356650		BioCoat コラーゲンI マルチウェルプレート 96ウェル (白色ウェル / 透明ボトム)	5	50	102,800	25
356651		BioCoat ポリ-D- リジン マルチウェルプレート 96ウェル (白色ウェル / 透明ボトム)	5	50	102,800	25
356660		BioCoat ポリ-D- リジン 384ウェルプレート 白色 / 透明	5	50	150,400	34
356661		BioCoat ポリ-D- リジン 384ウェルプレート 白色	5	50	94,900	34
356662		BioCoat ポリ-D- リジン 384ウェルプレート	5	50	94,900	34
356663		BioCoat ポリ-D- リジン 384ウェルプレート 黒色 / 透明	5	50	150,400	34
356664	○	BioCoat コラーゲンI 384ウェルプレート 白色 / 透明	5	50	150,400	34
356665		BioCoat コラーゲンI 384ウェルプレート 白色	5	50	94,900	34
356666		BioCoat コラーゲンI 384ウェルプレート	5	50	94,900	34
356667		BioCoat コラーゲンI 384ウェルプレート 黒色 / 透明	5	50	150,400	34
356689		BioCoat ゼラチンマルチウェルプレート 96ウェル	5	50	83,500	25
356690	○	BioCoat ポリ-D- リジンマルチウェルプレート 96ウェル	20	80	95,200	25
356691	○	BioCoat ポリ-D- リジンマルチウェルプレート 96ウェル (白色オパック)	20	80	102,800	25
356692		BioCoat ポリ-D- リジンマルチウェルプレート 96ウェル (黒色ウェル / 透明ボトム)	20	80	158,900	25
356693	○	BioCoat ポリ-D- リジンマルチウェルプレート 96ウェル (白色ウェル / 透明ボトム)	20	80	158,900	25
356697		BioCoat ポリ-D- リジン 384 ウェルプレート 黒色 / 透明	20	80	235,900	34
356698		BioCoat コラーゲンI マルチウェルプレート 96ウェル	20	80	97,500	25
356699		BioCoat コラーゲンI マルチウェルプレート 96ウェル (白色オパック)	20	80	102,800	25
356700		BioCoat コラーゲンI マルチウェルプレート 96ウェル (黒色ウェル / 透明ボトム)	20	80	158,900	25
356701	○	BioCoat コラーゲンI マルチウェルプレート 96ウェル (白色ウェル / 透明ボトム)	20	80	158,900	25
356702	○	BioCoat コラーゲンI 384ウェルプレート 白色 / 透明	20	80	235,900	34
356703		BioCoat コラーゲンI 384ウェルプレート 白色	20	80	149,200	34
356705		BioCoat コラーゲンI 384ウェルプレート 黒色 / 透明	20	80	235,900	34
356717		PureCoat アミン 96ウェル 黒色 / 透明プレート	5	50	105,600	25
356719		PureCoat アミン 384ウェル 黒色 / 透明プレート	5	50	146,900	34

## 索引・価格表

カタログ番号	受注発注品	製品名	個/パック	個/ケース	希望小売価格 (円)	ページ
3574BC		384ウェルソリッドプレート ローフランジ 白 平底 NBS バーコード付き 非滅菌 フタなし	10	50	74,800	32
3575BC		384ウェルソリッドプレート ローフランジ 黒 平底 NBS バーコード付き 非滅菌 フタなし	10	50	74,800	32
3702BC		384ウェルソリッドプレート 透明 平底 無処理 バーコード付き 非滅菌 フタなし	25	100	81,500	32
3724BC		1536ウェルプレート 黒 平底 無処理 バーコード付き 非滅菌 フタなし	10	50	203,100	39
3725BC		1536ウェルプレート 白 平底 無処理 バーコード付き 非滅菌 フタなし	10	50	203,100	39
3726BC		1536ウェルプレート 黒 平底 細胞培養表面処理 バーコード付き 滅菌済み フタ付	10	50	209,800	39
3727BC		1536ウェルプレート 白 平底 細胞培養表面処理 バーコード付き 滅菌済み フタ付	10	50	209,800	39
3728BC		1536 ウェルプレート 黒 平底 NBS バーコード付き 非滅菌 フタなし	10	50	216,500	39
3764BC		384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 細胞培養表面処理済み バーコード付き 滅菌済み フタ付	20	100	246,900	33
3770BC		CellBIND 384ウェル ローフランジ クリアボトム 黒 バーコード付き 滅菌済み フタ付	20	100	270,400	33
3821BC		ローボリューム ソリッドプレート 384ウェル 黒 平底 無処理 バーコード付き 非滅菌 フタなし	10	50	67,900	32
3824BC		ローボリューム ソリッドプレート 384ウェル 白 平底 NBS バーコード付き 非滅菌 フタなし	10	50	95,000	32
3832BC	◎ (20)	CellBIND 1536ウェルクリアボトムプレート 黒 ローベース 滅菌済み フタ付 ジェネリックバーコード付き	10	50	635,000	39
3838BC		1536ウェルクリアボトムプレート 黒 ローベース 細胞培養表面処理 バーコード付き 滅菌済み フタ付	10	50	559,200	39
3893BC		1536ウェルクリアボトムプレート 黒 平底 細胞培養表面処理済み バーコード付き 滅菌済み フタ付	10	50	559,200	39
3985BC		384ウェル オプティカルイメージングプレート 黒クリアボトム 細胞培養表面処理済み バーコード付き 滅菌済み フタ付	20	100	280,200	33

- ・価格は2023年4月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- ・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承下さい。
- ・For a listing of trademarks, visit [www.corning.com/lifesciences/trademarks](http://www.corning.com/lifesciences/trademarks). All other trademarks are the property of their respective owners.
- ・保証・免責事項: 特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床又は診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

# CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ7階

Tel:03-3586-1996 Fax:03-3586-1291

[www.corning.com/jp/lifesciences](http://www.corning.com/jp/lifesciences)

[CLSJP@corning.com](mailto:CLSJP@corning.com)

技術サポートへのお問い合わせは

Tel:03-3586-1268

[ScientificSupportJP@corning.com](mailto:ScientificSupportJP@corning.com)

©2023 Corning Incorporated  
CLS-089-08  
CLS-C-DL-MP-014 REV7  
R0-2304-000.08-O